

俏蜻蜓®

Инфракрасная импульсная противоздушная палочка

AGW-06

Руководство пользователя

Список продуктов


-Инфракрасный импульсный антифрикционный стержень X1;

- Кабель для зарядки Type-C X1;
- Руководство Пользователя X1;

Обзор продукта

- Физически он используется при раздражении и покраснении кожи после укусов комаров. 见 слон. Нет никаких химических остатков.
- Принцип: Инфракрасная импульсная технология используется для рассеивания тепла, выделяемого микрокристаллическим коллектором. Количество равномерно проникает в гелеобразную кожу комаров, дополненную вибрационным массажем.
- Применимая группа населения: дети (рекомендуется для детей старше 1 года) и различные группы людей, включая беременных женщин.

Части продукта

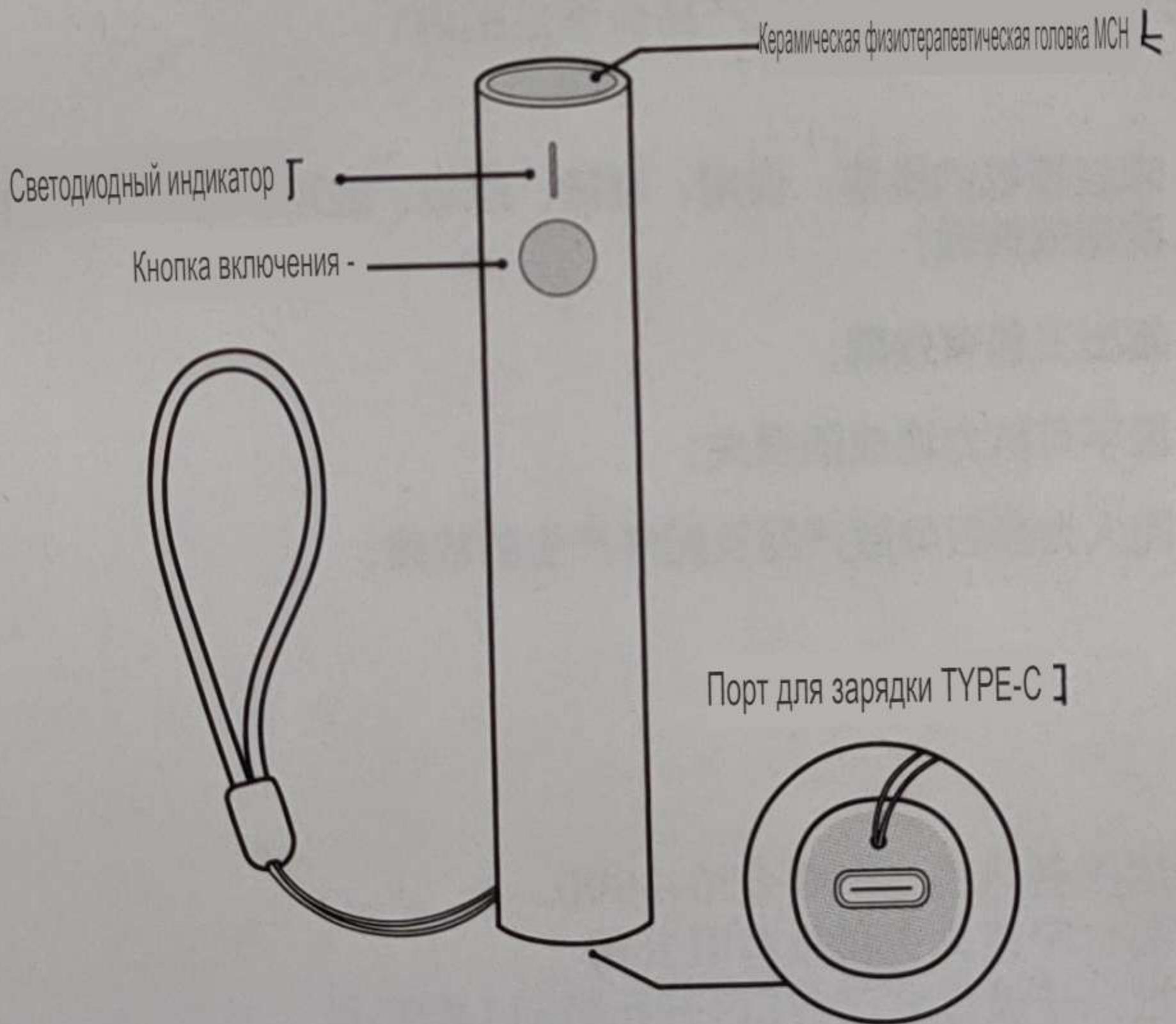

Шаги по использованию



- Когда вы используете этот продукт в первый раз, пожалуйста, сначала зарядите его.

Во время зарядки индикатор загорается зеленым;

После полной зарядки аккумулятора индикатор погаснет.

- Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 2 секунд, чтобы включить, устройство нагреется и завибрирует, и MCH ceramic будет включен. Держите голову поближе к месту укуса комара. После того, как устройство проработает 20 секунд, оно само-Автоматически отключается. Во время использования вы можете нажать и удерживать кнопку питания, чтобы выключить, и ее можно использовать повторно., Снимает боль и покраснение в месте укуса.

- Когда устройство работает, если вы выбираете нужную температуру, вы можете нажать кнопку питания один раз, чтобы отключить менять. Температура загрузки по умолчанию составляет 40°C, а индикатор горит синим цветом; Температура переключения составляет 50°C, а индикатор горит красным.

- Этот продукт точно контролирует температуру в безопасном диапазоне. Пожалуйста, не стесняйтесь использовать его.

- Поскольку существуют различия в индивидуальной переносимости каждой соматосенсорной температуры, рекомендуется, чтобы вы коренились Выберите приемлемую и комфортную температуру в соответствии с личными ощущениями.

Технические характеристики продукта

Модель :	AGW-06;
Напряжение зарядки :	USB 5V'
Зарядный ток	1000 МА
Емкость аккумулятора :	200 мАч
Объем продукта	18*18*102 мм
Масса нетто продукта	35 г
Материал изделия	Алюминий + АБС ;
Нагревательный материал	Керамика MCH ;

Три пачки ваучеров E

полное имя	
Контактный номер	
адрес	
Дата покупки	
Номер счета-фактуры	

Пожалуйста, храните данное руководство пользователя в безопасности. Если у вас есть какие-либо вопросы по продукту, пожалуйста, заполните информацию на этой странице. Затем отправьте его обратно вместе с товаром. После получения информации, пожалуйста, свяжитесь с платформами электронной коммерции Jingxuan. Получите его в онлайн-службе поддержки клиентов.

Меры предосторожности

- Попробуйте его на нормальной коже и нанесите на участок кожи после укуса комаров. С учетом различий, это нормальное явление.
- Не наносите его на раны, глаза и окружающую среду, а также не наносите на чувствительные или тонкие участки кожи. Для использования не наносите его на влажную кожу, высушите и тщательно нанесите перед использованием зона.
- Люди с плохим кровообращением, кожными аллергиями, онемением или кожными заболеваниями, чувствительностью к температуре Пожалуйста, не используйте его, если вы чувствуете себя нечистым.
- Этот продукт не может лечить или лечить аллергические реакции, которые могут быть вызваны укусами или укусами насекомых.
- Керамическую головку МСН этого изделия можно протирать и чистить спиртом, а не водой. Используйте Пожалуйста, обратите внимание на чистоту и гигиену.

Гарантийное обслуживание

Этот продукт строго соответствует "Закону о защите прав и интересов потребителей" и "Закону о качестве продукции".

Реализуйте три гарантии послепродажного обслуживания, подробное содержание обслуживания выглядит следующим образом:

- Семидневный возврат и обмен логистики (приобретенный через каналы электронной коммерции), некачественные причины будут нести ответственность за Цяо Цзинхэ
Нести логистику и фрахт;
- У этого продукта есть сбой производительности, указанный в "Таблице сбоев производительности продукта", после
После подтверждения теста вы можете бесплатно пользоваться следующими услугами;

Причины качества товара могут быть применены для возврата в течение 7 дней со дня получения;

Замена может быть произведена по соображениям качества продукции в течение 15 дней со дня получения;

Заявка на ремонт может быть подана в связи с качеством продукции в течение одного года со дня получения.

Таблица неисправностей производительности

ХIII

название

性能故障

Индикатор не горит

Недопустимая функция кнопки

Керамическая головка чайника МСН без нагрева

Не удается загрузиться

Пробка библиотеки инфракрасных импульсов Цзин Цзин Тин

Негарантийные правила |

Возникают следующие ситуации, ни на одну из которых гарантия на изделие не распространяется:

• Несанкционированное техническое обслуживание, неправильное использование, столкновение, небрежность, злоупотребление, попадание жидкости, несчастный случай

Изменить или уничтожить;

• По истечении срока действия трех пакетов;

• Убытки, вызванные форс-мажорными обстоятельствами;

• Выход из строя продуктов и аксессуаров по человеческим причинам;

Горячая линия национальной службы: 400-800-5990

Произведено: Ningbo Dayang Technology Co., Ltd. Адрес:

№ 95, переулок 311, Кайюань-роуд, промышленная зона Цзянбэй С, Нинбо