




## Конфигурация продукта ㉑

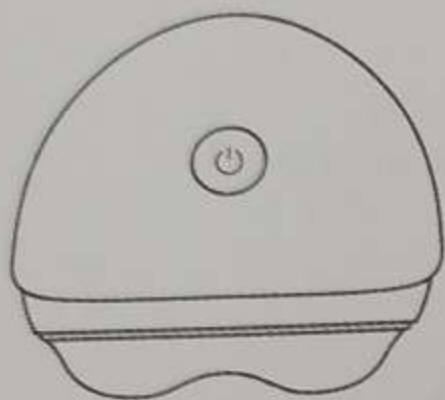

Массажная головка ㉒

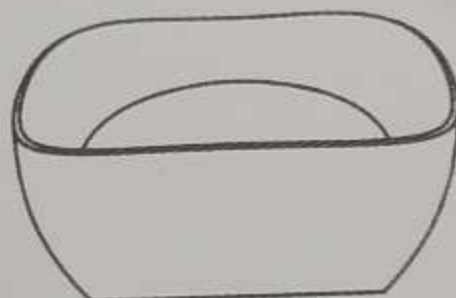

Зарядная база ㉓

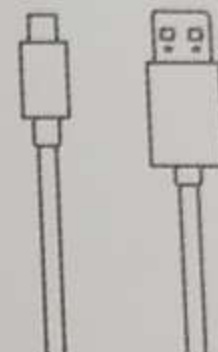

USB-кабель для зарядки ㉔

## Характеристики продукта ㉕

- Управление одной кнопкой, регулировка скорости и медленного ритма, а также простое управление одной рукой.;
- Два режима: быстрая перемотка вперед и назад, медленная перемотка вперед и назад, короткое нажатие для переключения режимов.;
- Массаж, подходящий для многих частей тела, нажимайте везде, где вы хотите. • Один цикл массажа продолжительностью 15 минут, автоматическое время остановки работы, безопасно и удобно.;
- Встроенная защита от остановки двигателя, автоматическая защита от перегрева, более низкий уровень потерь двигателя.;
- Экологически чистый ключ, срок службы батареи, дизайн беспроводной зарядки, портативная зарядка Micro USB, подходит для зарядных устройств 5V / 1A и выше.

## Техническое обслуживание продукта ㉖

### Место хранения ㉗

- Поместите изделие в оригинальную коробку или в безопасное, сухое и проветриваемое место, чтобы избежать острых царапин на поверхности ткани массажной головки.

### Чистый ㉘

- Не замачивайте изделие в каком-либо растворе для чистки.
- При чистке просто протрите мягкой и слегка влажной губкой.

## Способ работы и описание функций ㉙

### Подготовка перед использованием ㉚

- Проверьте изделие на наличие повреждений.

Пожалуйста, используйте для зарядки обычный адаптер 5V1A и выше.

## Способ работы

- Нажмите и удерживайте кнопку "Сердце" в течение 1,5 секунд, устройство начнет работать, и в это время массажная головка начнет вращаться.
- В рабочем состоянии устройства нажмите кнопку "Сердце", чтобы переключить скорость вращения массажной головки.
- Начиная с вращения массажной головки, каждые 20 секунд массажная головка будет автоматически поворачиваться в обратном направлении для массажа.
- Устройство автоматически прекратит работу через 15 минут или нажмите и удерживайте кнопку "Сердце" в течение 1,5 секунд, чтобы прекратить работу в любое время в рабочем состоянии.

## Состояние индикатора

- Белый индикатор быстро мигает, когда батарея разряжена, белый индикатор мигает при зарядке, белый индикатор гаснет, когда батарея заполнена, и белый индикатор всегда горит во время работы.
- Аккумулятор полностью заряжен и может использоваться непрерывно более 1 часа 30 минут (используйте хронометраж в режиме холостого хода).
- Рекомендуется использовать не более двух циклов (по 30 минут) каждый раз.


## Меры предосторожности при утилизации продукта

Литий-ионный аккумулятор, используемый в данном изделии, является ценным ресурсом, который может быть переработан и переработан. Пожалуйста, извлеките литий-ионный аккумулятор, когда он используется, и выбросьте его. Передайте его профессиональной организации, которая может перерабатывать и перерабатывать аккумуляторные батареи для переработки. Пожалуйста, следуйте приведенным ниже инструкциям до тех пор, пока изделие не будет удалено.

Оснащен батареей для ключей.




1. Подденьте матерчатый чехол за четыре угла по отдельности

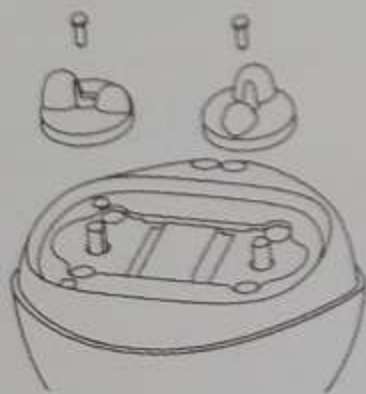


2. Открутите 2 винта с подъемной головкой и выньте 2 месильные головки




3. Открутите 5 винтов для фиксации нижней крышки

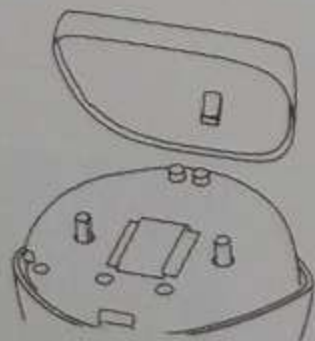


4. Затем оторвите нижнюю крышку

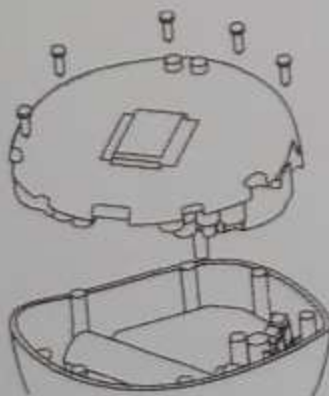

5. Открутите 8 винтов крышки опорной рамы

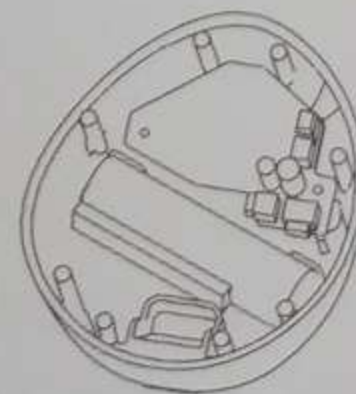

6. Демонтируйте плату кабеля аккумулятора. Голову, вы можете извлечь аккумулятор

Название продукта: Массажер для акупунктурных точек Lefan 

Размер изделия: 92,5 мм x 111,6 мм x 93,8 мм 

Номинальное напряжение: 5 В

Емкость аккумулятора: 2000 мАч, 7,4 Втч (3,7 В)


Диапазон температур рабочей среды: -5°C ~40°C

Диапазон рабочей относительной влажности: 25% 

~80% Диапазон рабочего атмосферного давления: 650hPa-1060hPa 

Модель продукта: LF-MN001

Вес продукта нетто: 320± 0,3 г;

Номинальная мощность: 5 Вт 


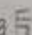
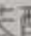

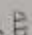
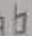
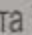




Исполнительный стандарт: GB4706.1-2005 GB4706.10-2008 Хранение и транспортировка

диапазон температур окружающей среды: -20 °C ~ 55°C Диапазон

относительной влажности при хранении и транспортировке: 10% ~80% 

Хранение и транспортировка Диапазон атмосферного давления: 650hPa-1060hPa

Название и содержание опасных веществ в продукте 

Название детали 	Опасные вещества 					
	铅 Pb	汞 Hg	镉 Cd	Шесть цен Cr(VI)	Многостранительный Союзный чай ПБДЗ	多溴二苯醚 ПБДЭ 
оболочка 	○	○	○	○	○	○
USB-кабель 	○	○	○	○	○	○
батарея 	×	○	○	○	○	○
Печатная плата 	×	○	○	○	○	○
Узел порта :	○	○	○	○	○	○
провод 	○	○	○	○	○	○
двигатель 	○	○	○	○	○	○
Термистор 	○	○	○	○	○	○
подшипник 	×	○	○	○	○	○

Эта форма подготовлена в соответствии с положениями SJ/T 11364.

0: Указывает на то, что содержание опасного вещества во всех однородных материалах компонента ниже предела, указанного в GB/T 26572.

X: Указывает, что содержание опасного вещества по крайней мере в одном однородном материале компонента превышает GB/T 26572.

Предписанные предельные требования.





## Диагностика ㄷ

Ненормальная ситуация ㄱ	Возможная причина ㄴ	Решение ㄷ
Не удается начать работу ㄹ	Батарея разряжена ㄴ	Подключите блок питания для зарядки. Нажмите и ㄷ
	Неправильный способ запуска ㄷ	удерживайте кнопку питания в течение 1,5 секунд ㄷ
Внезапно перестал работать ㄹ	Батарея разряжена ㄴ	Подключите блок питания для зарядки ㄷ
	Время массажа превышает 15 минут ㄷ	Нажмите и удерживайте кнопку сердца, чтобы возобновить работу ㄷ
	Непрерывное использование в течение слишком длительного времени, защита продукта от перегрева ㄷ	После того как продукт остынет, снова включите его ㄷ
	При приложении слишком большого усилия массажная головка застревает ㄷ	Снимите массажную головку и снова включите ее ㄷ

## Запрещенные вопросы ㄷ

• Те, кто получает лечение у врача или чувствует себя плохо. ㄷ

• Пациенты с гипертонией, заболеваниями сердца, церебральным атеросклерозом и церебральным тромбозом ㄷ

• Люди со злокачественными опухолями ㄷ

• Беременные женщины и женщины в период менструации ㄷ

\* Страдающие остеопорозом ㄷ

• Те, кто использует кардиостимулятор или имплантированное медицинское устройство ㄷ

• Люди с острыми заболеваниями ㄷ

• Несовершеннолетние и лица с физическими и психическими расстройствами ㄷ

• Не используйте его каждый раз более 30 минут. ㄷ

• Если тканевый чехол поврежден, не используйте это изделие. ㄷ

• Если жидкая волна приготовлена на продукте, пожалуйста, не используйте этот продукт ㄷ

• Если во время использования возникает ненормальная или сильная боль, не используйте этот продукт ㄷ

• Если во время использования будут обнаружены какие-либо механические повреждения или ненормальные условия, пожалуйста, не используйте

его. • Не заряжайте устройство в условиях грома и молнии. ㄷ

• Не подключайте и не отключайте источник питания мокрыми руками ㄷ

• Не допускайте, чтобы дети играли на изделии. ㄷ

## Описание гарантии ㉓

### Правила гарантии ㉔

В течение одного года с даты подписания контракта, если при нормальном использовании у продукта есть проблемы с качеством хоста, вы можете воспользоваться бесплатным техническим обслуживанием.

### Негарантийные правила ㉕

- Срок действия трех упаковок был превышен;
- Разбирайте и модифицируйте данное изделие без разрешения;
- Ущерб, причиненный форс-мажорными обстоятельствами;
- Данный продукт выходит из строя по человеческим причинам.

### Гарантийный сертификат ㉖

Модель продукта ㉗		Имя клиента ㉘	
Название продукта ㉙		Контактный номер	
Дата покупки ㉚		Место покупки ㉛	
Номер счета-фактуры ㉜		Контактный адрес ㉝	

\* Эта форма применима к продуктам с соответствующими правилами использования в трех упаковках. Этот гарантийный талон эквивалентен сертификату на три упаковки. Пожалуйста, храните его в безопасности.

Производитель: Xiamen Lefan Health Technology Co., Ltd. ]

Адрес компании: No. 31, Anling 2nd Road, Парк высоких технологий, район Хули, Сямынь ㉞

Официальный сайт компании: [www.lfwellness.cn](http://www.lfwellness.cn)

Горячая линия обслуживания: 400-101-8969



К черту! Мой друг, спасибо тебе за то, что ты выбрал Le Fan. Независимо от того, работаешь ты или живешь в дождевой трубе, ты должен отвечать за себя. Это немного лучше, используйте его каждый день, быстро избавляйтесь от усталости и идите по пути погони за мечтами. постоянный. Если вам нравятся наши продукты, присоединяйтесь к семейству Lefan~ ☺

Можете наслаждаться несколькими подарками:

1. Для оценки и фотографирования предусмотрены подарки и льготы (пожалуйста, свяжитесь со службой поддержки клиентов для получения более подробной информации).
2. Эксклюзивное предложение на ежемесячный день членства
3. Бесплатная оценка новых продуктов Lefan время от времени
4. Нерегулярная деятельность только для членов клуба

Поиск в WeChat: Lefanjiankang Добавляйте друзей, отмечайте "Le Fan", чтобы присоединиться к семье Le Fan, Получать льготы.

Сделайте массаж простым

Сканируйте код, чтобы узнать больше



Itwellness.cn