


Руководство по эксплуатации  
массажера для подтяжки шеи и кожи лица  
**WellSkins Beauty Neck Instrument**

Благодарим Вас за выбор массажера для подтяжки шеи и кожи лица **WellSkins Beauty Neck Instrument!**

Перед началом эксплуатации, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством.

## Обзор продукта

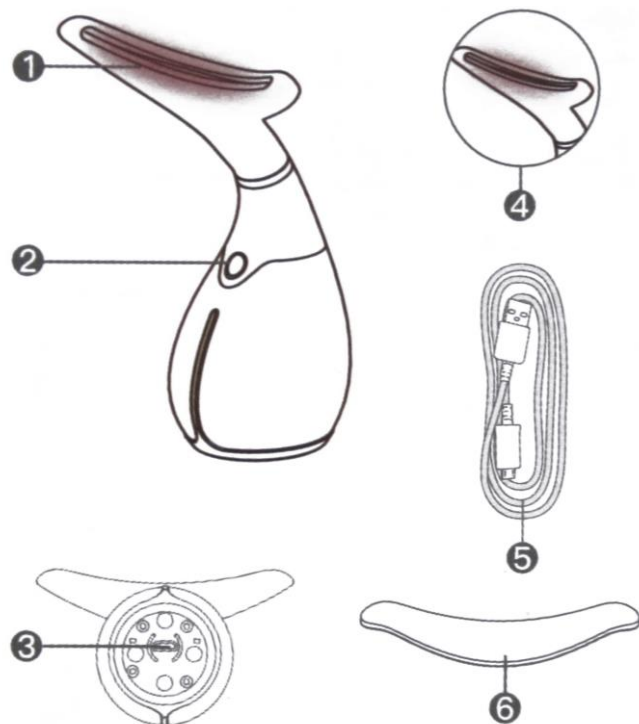

1. LED-лампа
2. Многофункциональная кнопка
3. Разъем питания Micro-USB
4. Массажная насадка
5. USB кабель
6. Защитная крышка

**Примечание:** Технические характеристики и внешний вид товара могут отличаться, приоритетную силу имеет реальный продукт.

## Эксплуатация продукта

- Перед использованием зарядите устройство;
- Устройство автоматически отключается после 15 минут непрерывного использования;
- Если продукт не используется в течение долгого времени, пожалуйста, заряжайте его раз в 3 месяца.

### Выбор массажного режима

Массажер WellSkins может работать в одном из двух массажных режимов:

#### Массажный режим

Температура нагрева  $45^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}$

Воздействие светом

Вибрация

#### Режим восстановления

Температура нагрева  $45^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}$

Воздействие светом

### Выбор цвета

#### Голубой цвет

Подтягивает дряблую кожу, усиливает синтез коллагена, подходит для жирной и чувствительной кожи

#### Зеленый цвет

Улучшает микро-циркуляцию кожи, уменьшает отечность и успокаивает кожу


#### Красный цвет

Улучшает циркуляцию крови, предотвращает возникновение морщин, восстанавливает естественный цвет кожи

## Эксплуатация продукта

### Использование на шее

1. Нанести средство по уходу на кожу шеи;
2. Поместите массажную головку на кожу и нажмите на многофункциональную кнопку;

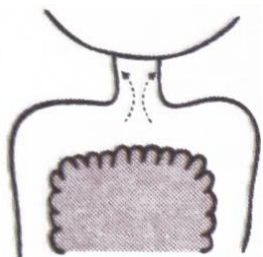

3. Выберите предпочтительный режим работы и начните водить массажером по массажным линиям: по бокам шеи массажные линии проходят сверху вниз, а спереди — снизу вверх, не касаясь щитовидной железы;
4. Задняя часть шеи также нуждается в уходе

и массаже.

### Использование на лице

1. Нанести средство по уходу на кожу лица;
2. Поместите массажную головку на кожу и нажмите на многофункциональную кнопку;
3. Выберите предпочтительный режим работы и начните водить массажером по массажным линиям:



- от центра подбородка к мочкам ушей;
- от уголков рта к середине ушей (козелкам);
- от подносового желобка к завиткам ушей;
- от спинки носа к вискам;
- от кончика носа к его крыльям;
- от кончика носа к переносице;
- от переносицы к вискам и линии роста волос.

## Важные положения

1. Для достижения наилучшего результата используйте устройство ежедневно не менее 5 – 10 минут в день;
2. Настоящее устройство является продуктом для индивидуального ухода, оно не может заменить рекомендации профессионального специалиста и назначенное им лечение, при наличии сомнений или особых показаний рекомендуется проконсультироваться с лечащим врачом;
3. Устройство представляет собой бытовой электронный прибор, оно не предназначено для терапевтического, коммерческого или иного применения.

## Противопоказания

- Острые воспаления на коже (экзема, герпес, пиодермия и т.п.);
- большое количество родинок и папиллом;
- царапины и ссадины на коже;
- беременность;
- онкологические заболевания;
- вживленный кардиостимулятор или иные электроимпланты;
- металлические предметы (штифты, золотые нити);
- нервно-психические заболевания;
- так же не рекомендуется использовать в период острых заболеваний организма.

## Технические характеристики

Модель: WX-MJ100

Вес: 70 г.

Габариты: 91 x 48 x 110 мм

Объем аккумулятора: 650 мАч

Номинальная мощность: 5W

## Отказ от обязательств

Изменения или исправления могут быть внесены в это руководство пользователя в связи с типографическими ошибками, неточностями текущих сведений или улучшениями программ и оборудования в любой момент и без предупреждения.

Все иллюстрации приведены исключительно для демонстрации и могут не представлять в точности фактическое устройство.