

DR.BEI Звуковая электрическая зубная
щетка S7
Руководство пользователя



Внимательно ознакомьтесь с руководством пользователя, прежде чем использовать устройство, и сохраните его для справки.

Благодарим за использование продукта по уходу за полостью рта DR.BEI

Пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство перед использованием, чтобы управлять правильным методом использования данного продукта, полностью выявить выдающиеся свойства, получить наилучший эффект ухода за полостью рта.

Содержание

I. Важные примечания	4
II. Руководство и рекомендации по утилизации использованных батарей:	5
III. Знакомство с устройством	6
IV. Как использовать устройство	8
V. Индукция перенапряжения и интеллектуальное преобразование частоты	11
VI. Беспредельное динамическое регулирование	12
VII. Зарядка	14
VIII. Технические характеристики	15
IX. Экологичность	16
X. Послепродажное обслуживание	16
XI. Устранение неполадок	17

I. Важные примечания

* Заявление

Первое использование данного устройства может сопровождаться зудом или кровоточивостью десен. Это связано с тем, что десны еще не привыкли к высокочастотной чистке электрической зубной щеткой. Начинающим пользователям рекомендуется использовать чистящую головку для чувствительных зубов или режим Soft. Зуд и кровоточивость должны стать менее заметны через 1–2 недели. Если этого не произошло, обратитесь к стоматологу. Этот продукт не предназначен для использования детьми младше 6 лет.

* Советы

1. Не позволяйте другим людям использовать вашу чистящую головку.
2. Не обматывайте шнур питания вокруг зарядной станции во время зарядки.
3. Не погружайте дорожный чехол в воду или другую жидкость во избежание ее попадания внутрь корпуса.

* Примечания

1. Устройство предназначено для очистки полости рта. Не используйте его для других целей. Если вы испытываете дискомфорт или боль, прекратите использование устройства и обратитесь к стоматологу.
2. Перед использованием продукта убедитесь в отсутствии на нем повреждений; прекратите использование, если продукт упал с большой высоты или был значительно поврежден.
3. Перед зарядкой убедитесь, что напряжение продукта соответствует напряжению местной сети.
4. Не используйте зарядную станцию, если она повреждена.
5. Выполняйте замену чистящей головки каждые 3 месяца или чаще в зависимости от степени износа.


* Предупреждения

1. Если вы проходите курс ортодонтического лечения, используете зубные протезы или импланты, проконсультируйтесь со стоматологом о возможности использования устройства.
2. Этот продукт соответствует стандартам безопасности для электромагнитных устройств. Если вы не уверены в совместимости с кардиостимулятором или другими имплантами, проконсультируйтесь с лечащим врачом или производителем устройства перед использованием.
3. Этот продукт использует встроенный аккумулятор, который не подлежит замене. Не сжигайте его и не подвергайте сильному нагреву. Не заряжайте и не используйте устройство при высокой температуре окружающей среды.
4. Не погружайте зарядную станцию в воду или другую жидкость.
5. Перед подключением к источнику питания во время зарядки убедитесь, что вилка питания и интерфейс полностью сухие.
6. Не роняйте и не подвергайте продукт механическим воздействиям.
7. Прекратите использование, если продукт получил механические повреждения или упал с высоты.
8. Не выполняйте самостоятельную модификацию, разборку и ремонт продукта.
9. Не используйте продукт в душе и ванне.
9. Не ставьте металлические объекты на зарядную станцию во время зарядки.

II. Руководство и рекомендации по утилизации использованных батарей:

1. Когда срок годности продукта истекает, внутреннюю батарею следует разобрать для правильной утилизации в соответствии с законами и правилами страны или региона, где она находится. Если вы не можете извлечь батарею, отнесите изделие в назначенный правительством центр утилизации.

2. При извлечении аккумулятора продукт должен быть отключен. Если вы не можете извлечь батарею, отнесите изделие в назначенный правительством центр утилизации. Метод принудительного извлечения батареи во время бросания продукта:

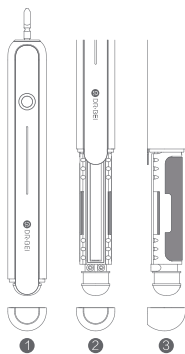

- ① Снимите нижнюю крышку
- ② Снимите внутренний кронштейн;
- ③ Отрежьте никелевый лист аккумулятора за кронштейном, чтобы извлечь батарею.

*Этот продукт не поддерживает замену аккумулятора пользователем самостоятельно. Функция продукта будет повреждена во время принудительного извлечения аккумулятора. Пожалуйста, соблюдайте осторожность.

III. Знакомство с устройством

Благодарим за выбор DR.BEI для поддержания здоровья вашей полости рта.



Перечень продуктов

Благодарим за выбор DR.BEI для поддержания здоровья вашей полости рта.
См. ниже, чтобы ознакомиться со списком доступных аксессуаров.



Ручка электрической
зубной щеткиx1



Беспроводная зарядная
док-станцияx1



Шнур питанияx1



4D насадкаx2



Руководство
пользователяx1





PU Дорожный
чехолx1

насадки

4D (чувствительная) чистящая головка предназначена для людей с чувствительной полостью рта и высокой кровоточивостью десен.
4D (чистящая) чистящая головка головки необходима для людей с заметным зубным налетом, например от сигарет или чая.

4D (чувствительная)
DR,BEI 4D GUM

4D (чистящая)
DR,BEI 4D CLEAN

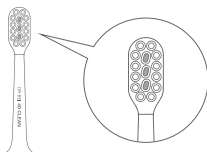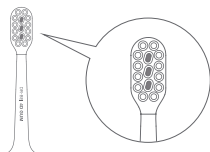

IV. Как использовать устройство

Включать

Коротко нажмите кнопку питания, чтобы включить;

По умолчанию на щетке выбран режим очистки.

Выключить

После включения, нажмите пять состояний «режим очистки

-нежный режим - режим чувства
-режим отбеливания - режим SPA
-выключения», чтобы завершить односторонний цикл;

После включения, используйте любой режим в течение более 5 секунд, короткое нажатие для выключения;

После включения, автоматически выключится через две минуты после чистки зубов в любом режиме.

Режим переключения

После включения, режим очистки активируется по умолчанию. В течение 5 секунд, коротко нажмите выключатель еще раз, система переходит в следующий режим, и цикл является односторонним циклом в соответствии с шестью состояниями «нежный режим - режим чувства -режим отбеливания - режим SPA-выключение».

Функция памяти

система запомнит последний режим, который вы использовали в течение более чем 5 секунд, и активирует его при следующем включении устройства.

Исчисление время очистки зубов


Любой режим является напоминанием с четырьмя разделами, с 30 секундами в каждом разделе и паузой 0,1 секунды в середине как напоминание раздела. Каждое время чистки зубов составляет 2 минуты и напоминает 3 раза. Через исчисление времени 2 минут система автоматически выключится.

Цикл исчисления время начинается с текущего нового режима и не накапливает время предыдущего режима.



Установка чистящей головки

Пожалуйста, следуйте инструкциям ниже, держите щетку и стеклянную панель в одном направлении, и осторожно надавливайте головкой щетки вдоль вала двигателя, пока не зафиксирована.

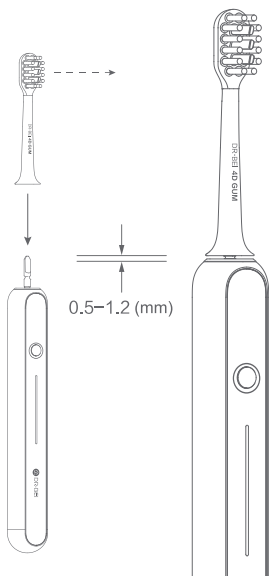

Как чистить зубы

Звуковая электрическая зубная щетка DR.BEI поддерживает использование метода Басс, рекомендованной Американской стоматологической ассоциацией (ADA) для эффективного удаления налета в полости рта.

Следующие рекомендации могут помочь вам в достижении эффективной чистки зубов:



Чистите щетинки, направляя щетинки под углом 45°, чтобы эффективнее удалять налет в десневой борозде.



Двойная скорость и низкий уровень шума
Бесщеточный звуковой мотор с магнитным подвесом.



Напоминание после каждых 30 секунд чистки
Перейдите к следующей области чистки после короткого перерыва.




Постепенное нарастание вибрации
Без разбрызгивания
Повышенный комфорт и чистота.

* Рекомендуется давить щеткой на поверхность зубов с усилием не более 2 Н и направлять ее на каждые 2 зуба при первом использовании. Напоминание каждые 30 секунд чистки позволит тщательнее чистить как внутреннюю, так и внешнюю сторону ваших зубов.


Очистка



Очищайте чистящую головку целиком и давайте ей высохнуть

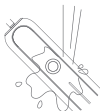

Водонепроницаемый корпус. Можно мыть проточной водой

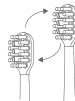


Меняйте чистящую головку раз в 2–3 месяца

V. Индукция перенапряжения и интеллектуальное преобразование частоты

Данный продукт всегда контролирует нагрузку на головку щетки, чтобы предупредить вас, когда сила чистки превышает определенный диапазон, и разумно преобразовать частоту, чтобы избежать повреждения полости рта.

1. Когда нагрузка на головку щетки слишком сильна, предупреждающий свет в конце ручки кисти будет светиться красным цветом, указывая, что ваша сила чистки может быть слишком большой в это время;
2. Пока светится предупреждающий свет, система автоматически снижает мощность чистки. Только головка щетки слегка нажимается, система автоматически возвращается в исходное состояние.
3. В этом случае преобразование частоты означает изменение выходной мощности головки щетки, чтобы облегчить ущерб для полости рта когда ваша сила чистки может быть слишком большой.

Схематическая карта хвоста электрощеточной ручки:

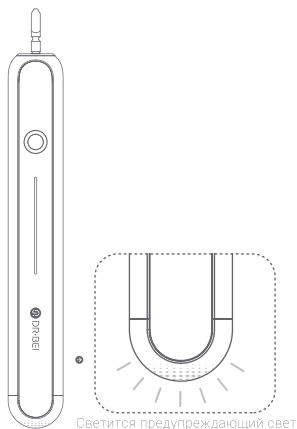

VI. Беспредельное динамическое регулирование

Что такое «беспредельное динамическое регулирование»

В соответствии с различными потребностями в уходе за полостью рта, данный продукт может свободно регулировать амплитуду качания головки щетки, чтобы обеспечить различные мощности для чистки.

Метод использования «беспредельное динамическое регулирование»:


1. В состоянии включения, нажмите и удерживайте кнопку переключения (более 1 секунды), система перейдет в режим беспредельного динамического регулирования. После выбора подходящей мощности отпустите кнопку переключателя, чтобы автоматически выйти из режима беспредельного динамического регулирования.
2. Каждый раз, когда регулируется мощность, система будет использовать выбранную мощность в качестве мощности по умолчанию. При следующей настройке на этот режим, система будет работать в соответствии с этой мощностью по умолчанию.
3. Если вам необходимо снова отрегулировать мощность, обратитесь к шагу 1 в течение длительного времени нажимать кнопку переключателя, и можно отрегулировать его снова, основываясь на предыдущей мощности.

Разные мощности соответствуют разной длине светодиодной ленты и схематической карте цвета:



Восстановление динамических заводских настроек

Если вам необходимо восстановить динамические заводские настройки системы, подключите беспроводную зарядную док-станцию к питанию и поместите электрозубочисточную ручку в беспроводную зарядную док-станцию, чтобы перейти в состояние зарядки. Нажмите и удерживайте кнопку переключателя более 2 секунд, пока все световые индикаторы не светятся белым, и система вернется в состояние мощности заводских настроек.

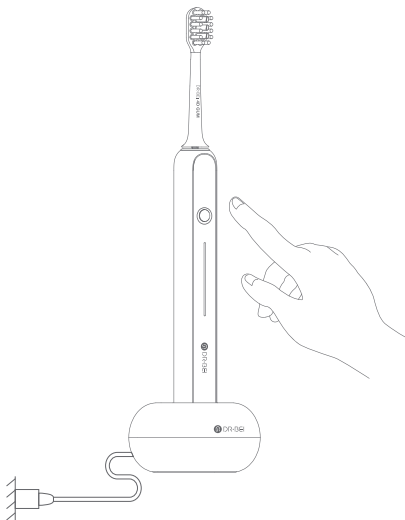

* Особые положения:

1. В настоящее время, в пятом режиме SPA, нет функции беспредельного динамического регулирования для обеспечения стабильного эффекта массажа десен;
2. Беспредельное динамическое регулирование дает вам больше возможностей для чистки, поэтому рекомендуется выбрать мощность, чтобы испытать лучшие ощущения и почистить зубы, одновременно защищая десны.

VII. Зарядка

Поместите электрощеточную ручку в беспроводную зарядную док-станцию, подключите шнур питания док-станции и включите питание для зарядки.

Режим в состоянии использования и индикатор питания

- Синяя светодиодная лента: заряд аккумулятора 10%-100%, обычное использование 3 месяца
- Оранжевая светодиодная лента: заряд аккумулятора 5%-10%, обычное использование 7.5 дня
- Красная светодиодная лента: заряд аккумулятора 0%-5%, обычное использование 3 дня

При работе соответствующие индикаторы режима показывают розовый и белый цвет, а цвета остальных четырех индикаторов представляют мощность.

Световой индикатора в состоянии подзарядки

Неполная подзарядка: поток градиента света

Полная подзарядка: индикатор питания всегда включен

- Зеленый постоянный цвет: заряд аккумулятора 100%
- Зеленое течение: заряд аккумулятора 20%-100%
- Оранжевое течение: заряд аккумулятора 10%-20%
- Красное течение: заряд аккумулятора 0%-10%

Когда начинается зарядка, индикатор выявляет ходовой свет, потом вступает в режим энергетической зарядки, выявляется живое освещение.



***Внимание:**

1. Не погружайте зарядную станцию в воду или другую жидкость.
2. Не используйте и не помещайте зарядную станцию в среду с высокой температурой
3. Не используйте устройство во время зарядки.

* Пробуждение индикатора зарядки: когда поместите электрощеточную ручку в беспроводную зарядную док-станцию для начала зарядки, индикатор отображает соответствующий индикатор при текущем состоянии питания, отображает ходовой свет в течение 30 секунд, а затем переходит в режим живого освещения текущей мощности. После входа в состояние живого освещения нажмите один раз кнопку переключателя, будет отображать ходовой свет в течение 10 секунд, а затем вернется в состояние живого освещения.

Хранение: Если долго не использовать, нужно зарядить батарею.

VIII. Технические характеристики

DR.BEI Звуковая электрическая зубная щетка S7		
Ручка электрической зубной щетки	Модель	DR.BEI S7
	Номинальное рабочее напряжение	3.7V ---
	Номинальная мощность	4.2W
	Уровень водонепроницаемости	IPX7
	Время зарядки	12 часов для полной зарядки
Зарядная станция	Номинальный вход	5V ---1A
Дата изготовления		См. на упаковке
Страна изготовления		Китай

EAC

IX. Защита окружающей среды

Руководство и рекомендации по утилизации использованных батарей:
При достижении ожидаемого срока эксплуатации устройства в соответствии с законами и нормативными актами страны или региона может потребоваться извлечь внутренний аккумулятор для его надлежащей утилизации. Если вы не можете извлечь аккумулятор, отправьте изделие в специализированный центр утилизации.

X. Послепродажное обслуживание

В случае возникновения неполадки, присутствующей в списке неполадок звуковой электрической зубной щетки DR.BEI S7, обратитесь к местному авторизованному дистрибьютору или розничному оператору.

Гарантийный срок : Гарантия 1 год

Срок службы : 2 года

ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ ГАРАНТИИ

1. Ущерб, нанесенный самостоятельным ремонтом, неправильным или небрежным использованием, механическим воздействием, попаданием жидкости, несчастным случаем, а также неправильным использованием или недопустимой модификацией аксессуаров к продукту, а также наличие сорванных или измененных этикеток защиты от подделывания.
2. Завершение периода гарантийного обслуживания (ремонта, возврата средств, замены).
3. Ущерб, нанесенный при обстоятельствах непреодолимой силы.
4. Отсутствие неполадки в списке неполадок звуковой электрической зубной щетки DR.BEI S7.
5. Неполадка имеется в списке неполадок звуковой электрической зубной щетки DR.BEI S7, но ее появление вызвано действиями пользователя.

Список неполадок звуковой электрической зубной щетки DR.BEI S7

Наименование	Неполадка
Звуковая электрическая зубная щетка	Не включается / не выключается
	Чистящую головку не удается подсоединить к передаточному валу, хотя посторонние предметы отсутствуют
	Странные вибрации чистящей головки
	Индикатор питания не мигает
	Прибор не заряжается

XI. Устранение неполадок

Проблемы	Причины	Решения
Не удается закрепить на чистящая головка передаточный вал.	Засор в разъеме для чистящей головки; Посторонний предмет попал в передаточный вал; Чистящая головка не рекомендуется производителем или не поддерживается; Неверная ориентация.	Удалите посторонний предмет; Приобретите оригинальную чистящую головку, рекомендованную производителем; Соедините компоненты в соответствии с инструкциями;

Не включается	Низкий заряд, выключено либо заряжается.	Зарядите устройство или снимите зубную щетку с зарядной станции.
Слишком слабая вибрация чистящей головки	Слишком свободное или плотное соединение; Засор между чистящей головкой и передаточным валом.	Установите ее правильным образом; Устраните посторонний предмет.
Ручка не подключается к зарядной станции	Посторонний предмет в нижней части ручки; посторонний предмет в разъеме питания.	Устраните посторонний предмет.
Индикатор питания не показывает статус зарядки при установке на зарядную станцию	Неверное положение вилки в розетке электросети.	Проверьте правильность подключения к электросети.
Индикатор питания не показывает текущий заряд аккумулятора	Низкий или полностью исчерпанный заряд.	При корректной зарядке проблема через некоторое время будет устранена.
вибрация занижена	Беспредельное динамическое регулирование не подходит	Восстановление динамических заводских настроек

Производители: Wuxi Qinghe Xiaobei Technology Co., Ltd.
Адрес: Room 1106, 11th Floor, NO.2 of Building 530,
Binhu District, Wuxi City, Jiangsu, Китай
почтовый ящик: service@doctorbei.com



Scan to connect and
discover more on Facebook.

 DR.BEI

Для получения дополнительной
информации перейдите на
официальный сайт DR.BEI

www.doctorbei.com