

пангао



Наколенники Treasure-Умный Массажер Для Наколенников

Интеллектуальный Массажер Для Колена

PG-2015F3



Благодарим вас за покупку и использование данного продукта. Пожалуйста, внимательно прочтите данное руководство перед его использованием и храните его в безопасности.

Введение продукта

Этот продукт разработан в соответствии с эргономическими и физическими методами массажа, а также использует пневматический массаж и вибрацию. Массаж с движением шарика, интеллектуальное управление горячим компрессом постоянной температуры, видимый красный цвет с длиной волны 600-700 нм

Свет и другие функции.


Характеристики продукта

1. Его легко носить и он имеет модный внешний вид.
2. Пневматический массаж: Используйте принцип сжатия сильного давления воздуха для массажа коленного сустава.;
3. Вибрационный массаж: установите 3 режима вибрации, которые можно выбрать в соответствии с личным комфортом; 4. Горячий компресс: установите низкую, среднюю и высокую температуры, которые можно регулировать в соответствии с вашими собственными потребностями и температурой окружающей среды.


выбор;

5. Облучение видимым красным светом с длинами волн 600-700 нм;
6. ЖК-дисплей, подсказка зуммера, более удобная в использовании;
7. Функция автоматического отключения при внутренней настройке;
8. Встроенный аккумулятор для ключей большой емкости, который более удобен в использовании.

Иллюстрация продукта

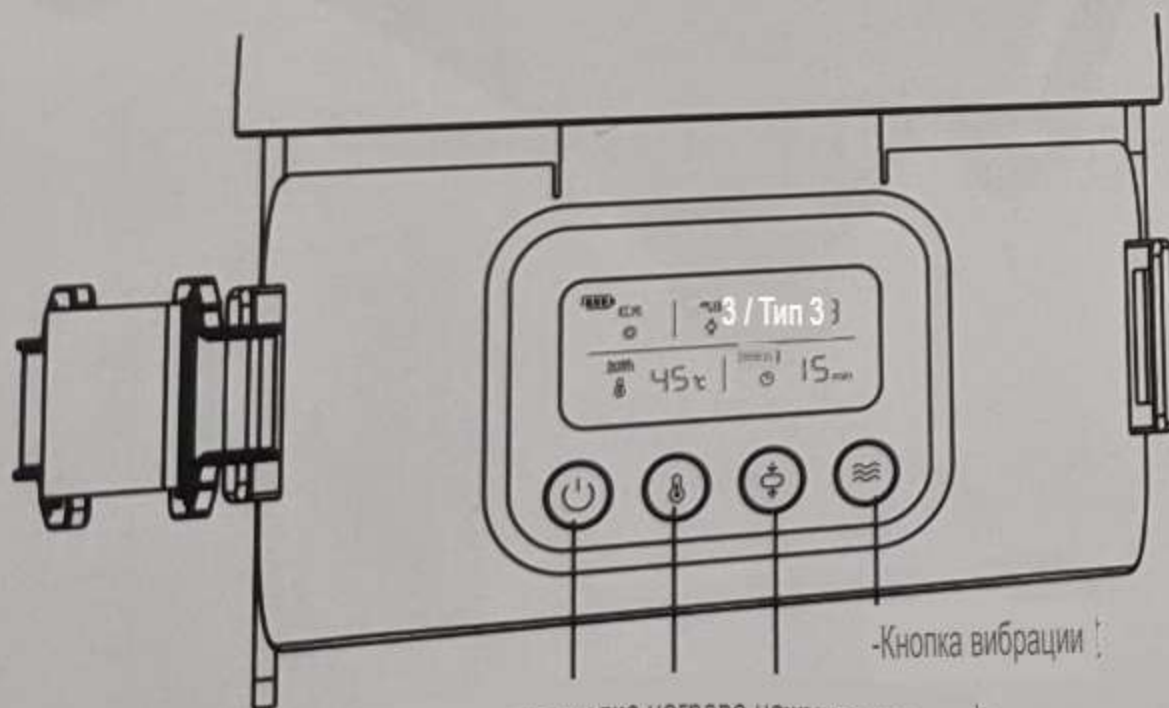

Кнопка включения-кнопка нагрева нажмите кнопку

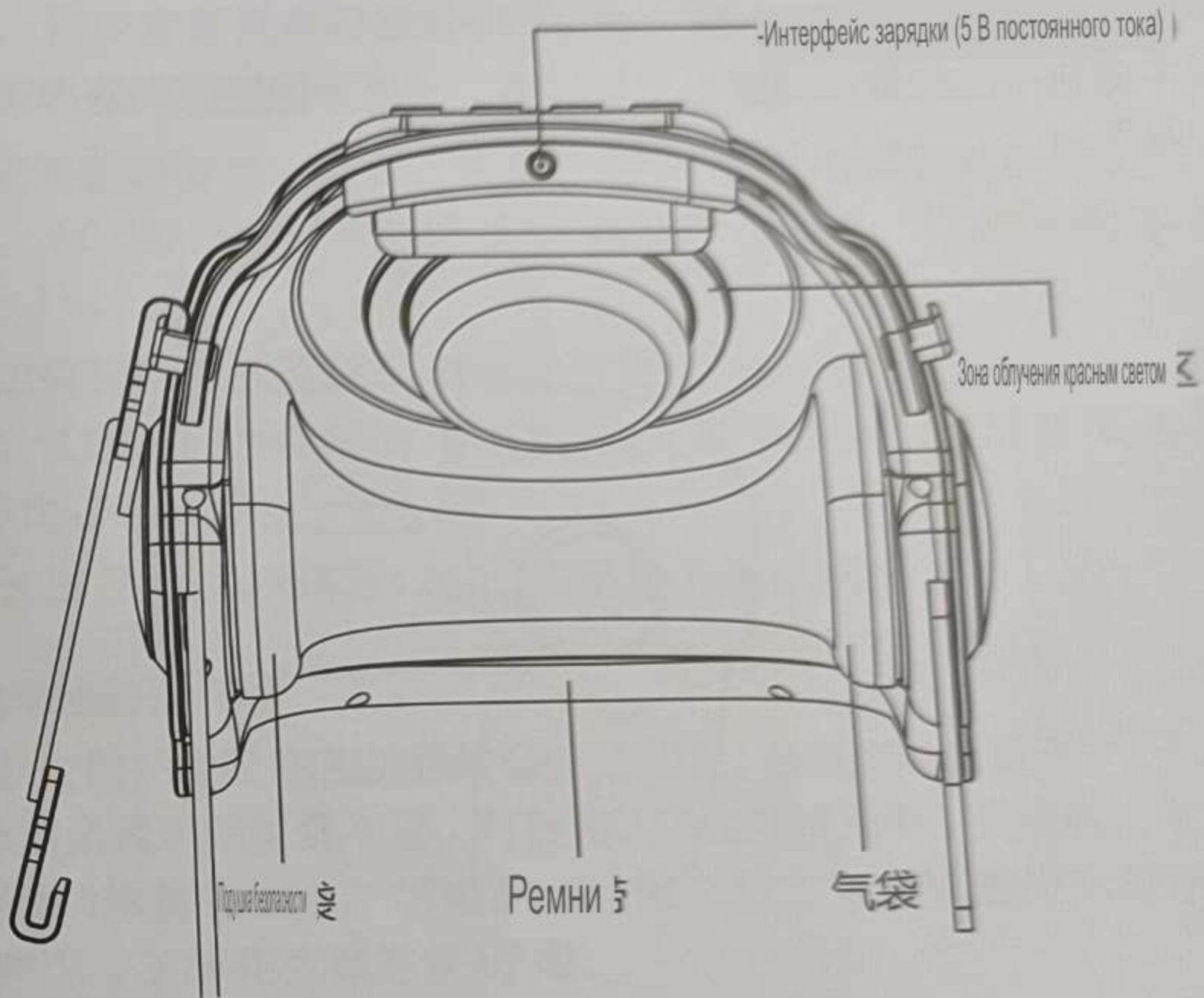


Подготовить перед использованием

Перед использованием, пожалуйста, проверьте, полностью ли заряжен встроенный аккумулятор устройства. Вы можете нажать кнопку "сердце" на короткое время, чтобы открыть его. Проверьте сетку дисплея питания в верхнем левом углу ЖК-дисплея. Если отображается "", вам необходимо зарядить, пожалуйста, используйте USB. Кабель подключен для зарядки, и рекомендуется использовать его после полной зарядки.

Загрузка продукта ;

Поместите изделие на колено, как показано на рисунке ниже, затем закрепите два ремня и отрегулируйте ремни для удобства ;

Подходит для основного.

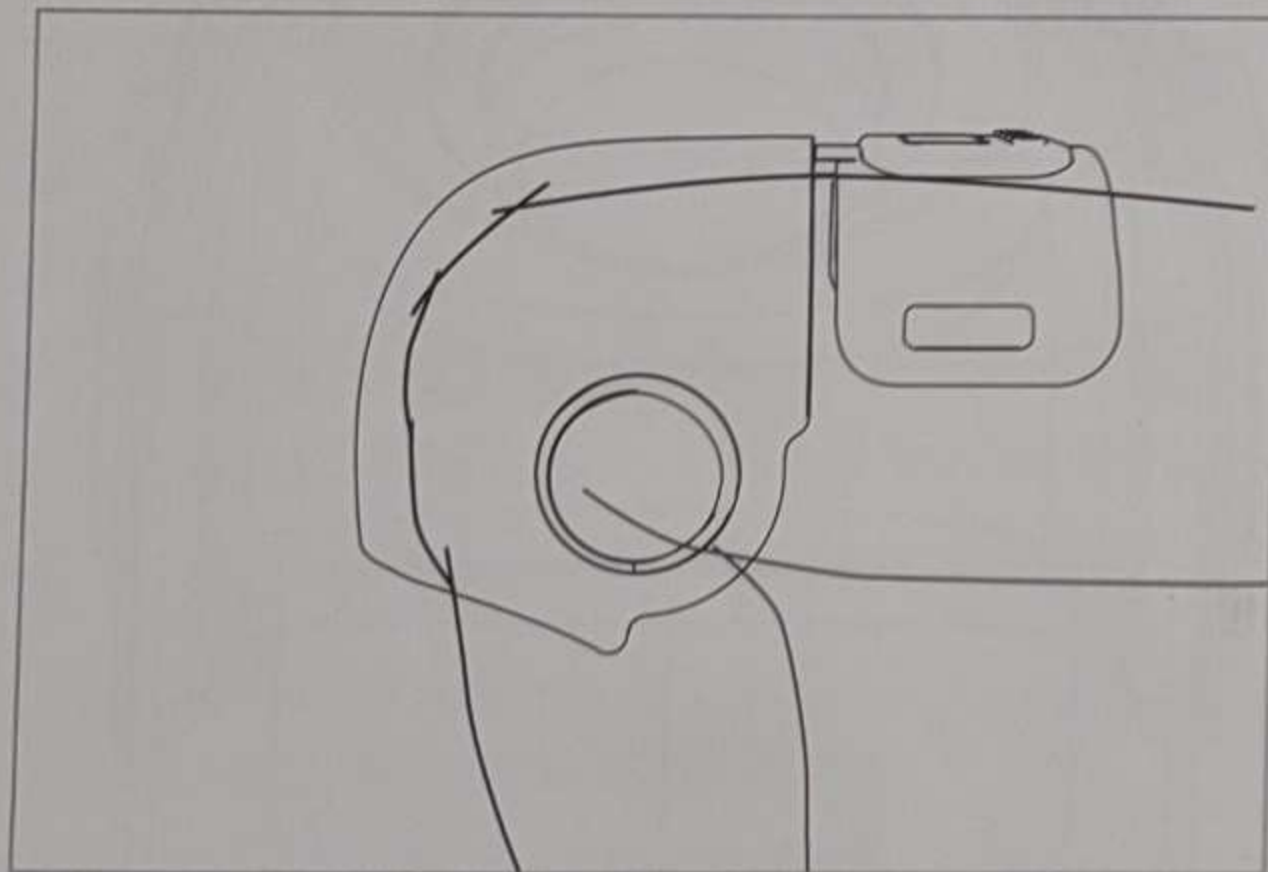

Инструкции по эксплуатации |

1. Нажмите и удерживайте кнопку "сердце", чтобы включить, хост начнет работать, а температура нагрева по умолчанию составляет 45 °С., Режим подсветки красным светом и режим давления 2, время синхронизации по умолчанию составляет 20 минут, и оно будет автоматически через 20 минут. Чтобы прекратить работу, вы также можете ненадолго нажать кнопку переключения "", чтобы выбрать три разных времени синхронизации в соответствии с ;
Время составляет 20 минут, 30 минут и 10 минут.

2. Если вам нужно отрегулировать температуру, нажмите кнопку "&" в течение короткого времени, чтобы выбрать три режима нагрева, ЖК-дисплей Отобразите соответствующее значение температуры. Последовательные циклы: 41°C-45°C-48°C -остановка нагрева -41°C- 45°C-, Когда включен режим нагрева, одновременно работает режим облучения красным светом; режим нагрева ;
При остановке режим подсветки красным светом также остановится в то же время.

Примечание: Рекомендуется выбирать передачи 41 ° C и 45 ° C для использования летом; 45 ° C для использования зимой, передача при температуре 48°C.

3. Если вам нужно настроить режим давления воздуха, просто нажмите кнопку "средний", чтобы выбрать три различных давления воздуха. Режим, на ЖК-дисплее отображаются соответствующие режимы 1, 2 и 3. Цикл по очереди: 2-3-Остановка-1-2 - ;

4. Если вам нужно настроить режим вибрации, просто нажмите кнопку "", чтобы выбрать три различных режима вибрации. Режим, на ЖК-дисплее отображаются соответствующие режимы 1, 2 и 3. Цикл по очереди: 1-2-3-остановка-1-2 - ;

5. Нажмите и удерживайте кнопку "сердце" около 1-2 секунд, и хост перейдет в состояние выключения.

Использование аккумуляторных батарей

1. Во время использования наколенника Treasure-интеллектуального массажера для наколенников, когда уровень заряда батареи показывает "", Это означает, что встроенный аккумулятор разряжен, и вы можете использовать USB-кабель для его зарядки. при зарядке аккумулятор заряжается. Мигает 3-элементный дисплей значка громкости. Когда батарея полностью заряжена, на значке уровня заряда батареи отображается полная ячейка. "", Для полной зарядки требуется около 4 часов.

2. Его можно использовать в течение примерно 4-5 дней после полной зарядки (20 минут использования в день).

3. При нормальном использовании срок службы этой аккумуляторной батареи составляет 2500 циклов зарядки и разрядки, что составляет около 3 лет. Используйте в течение 3 лет.

4. Если аккумуляторная батарея не используется в течение длительного времени, срок службы аккумуляторной батареи будет сокращен. Рекомендуется Заряжайте не реже одного раза в месяц.

Как извлечь аккумуляторную батарею

1. Аккумуляторная батарея, встроенная в данное изделие, содержит вещества, которые могут загрязнять окружающую среду. Перед утилизацией данного изделия,

Встроенный аккумулятор следует извлечь.


2. Перед разложением данного изделия и извлечением аккумулятора обязательно выключите питание или выключите аккумулятор.,

3. Подробные инструкции по извлечению батареи ключа показаны на рисунке ниже. Разбирайте данное изделие в порядке -@,



Извлеките батарейку ключа.

4. Извлеченные батарейки сарр следует безопасно утилизировать, выбросить в месте, установленном правительством, или переработать. ㄩ


единица.

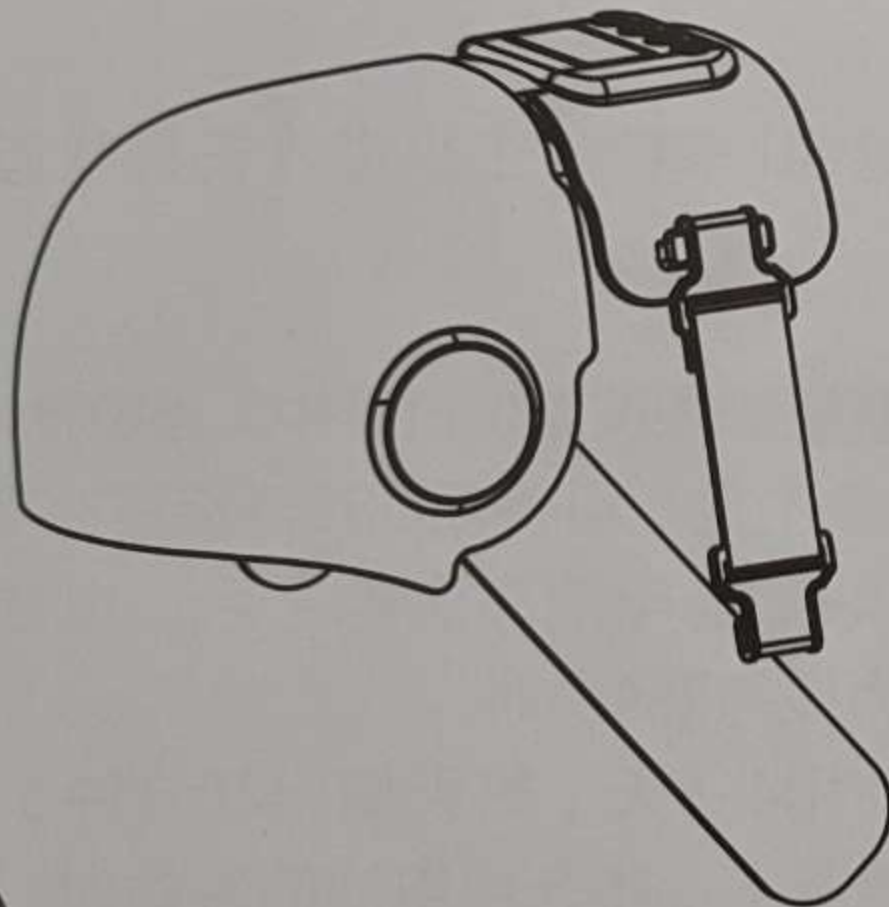


Шаг-1

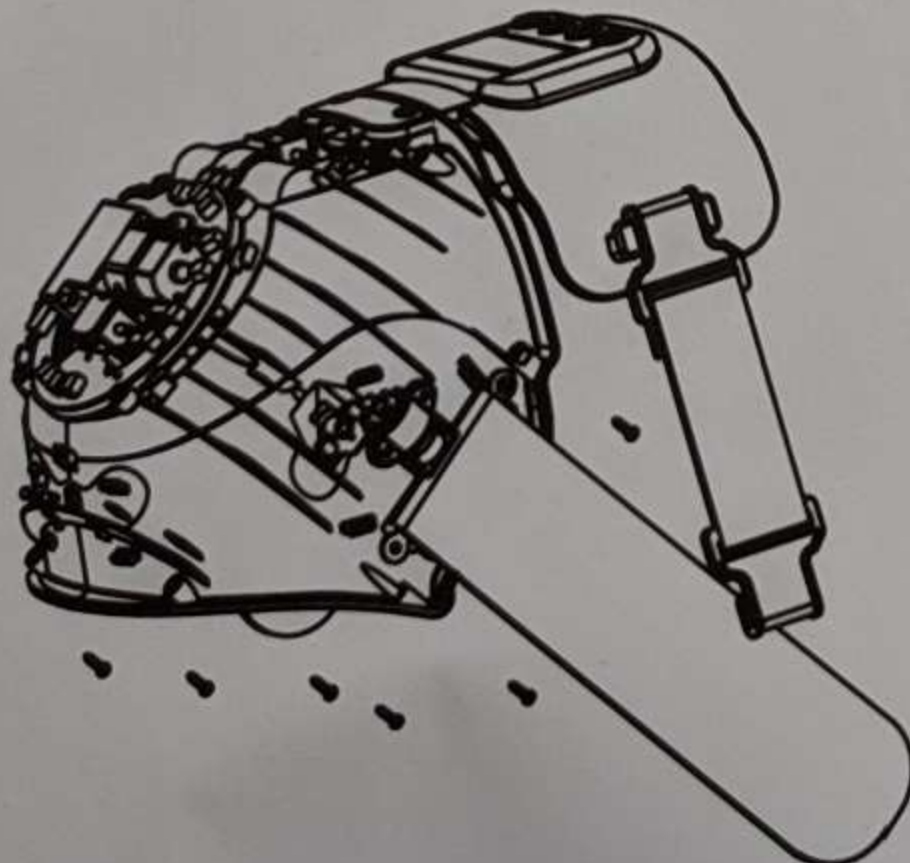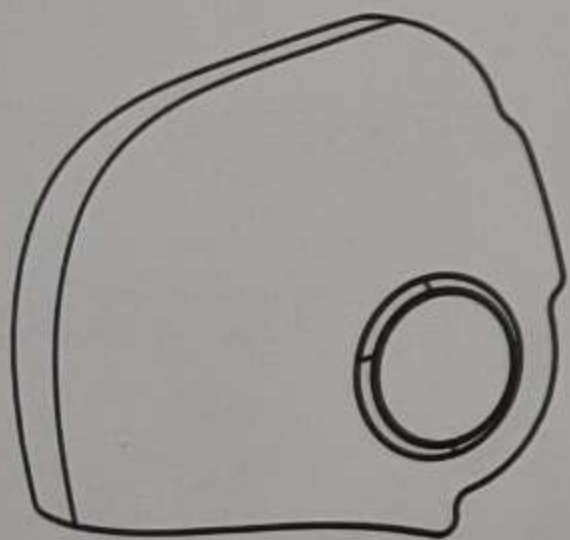

Шаг-2

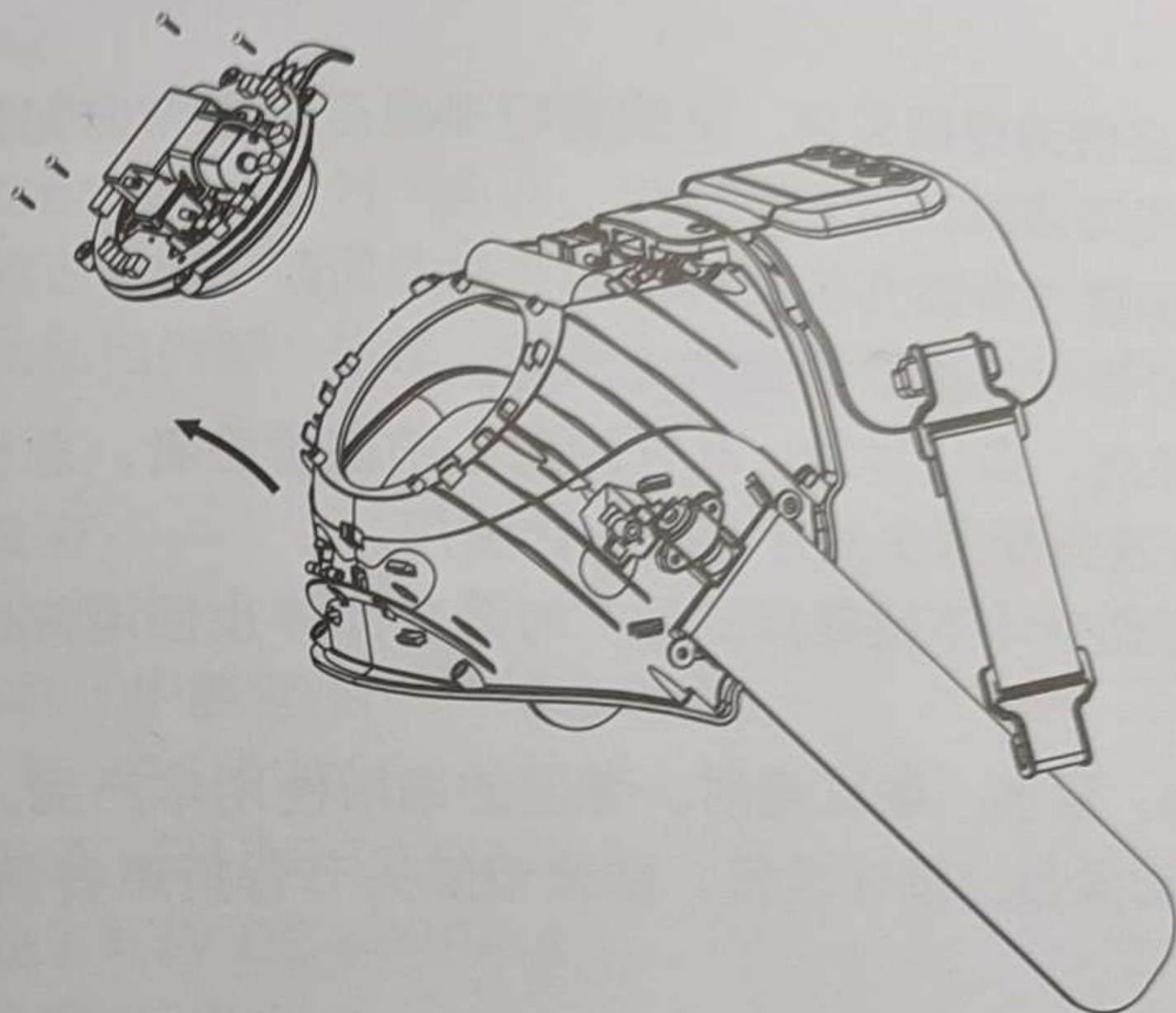

Шаг-3

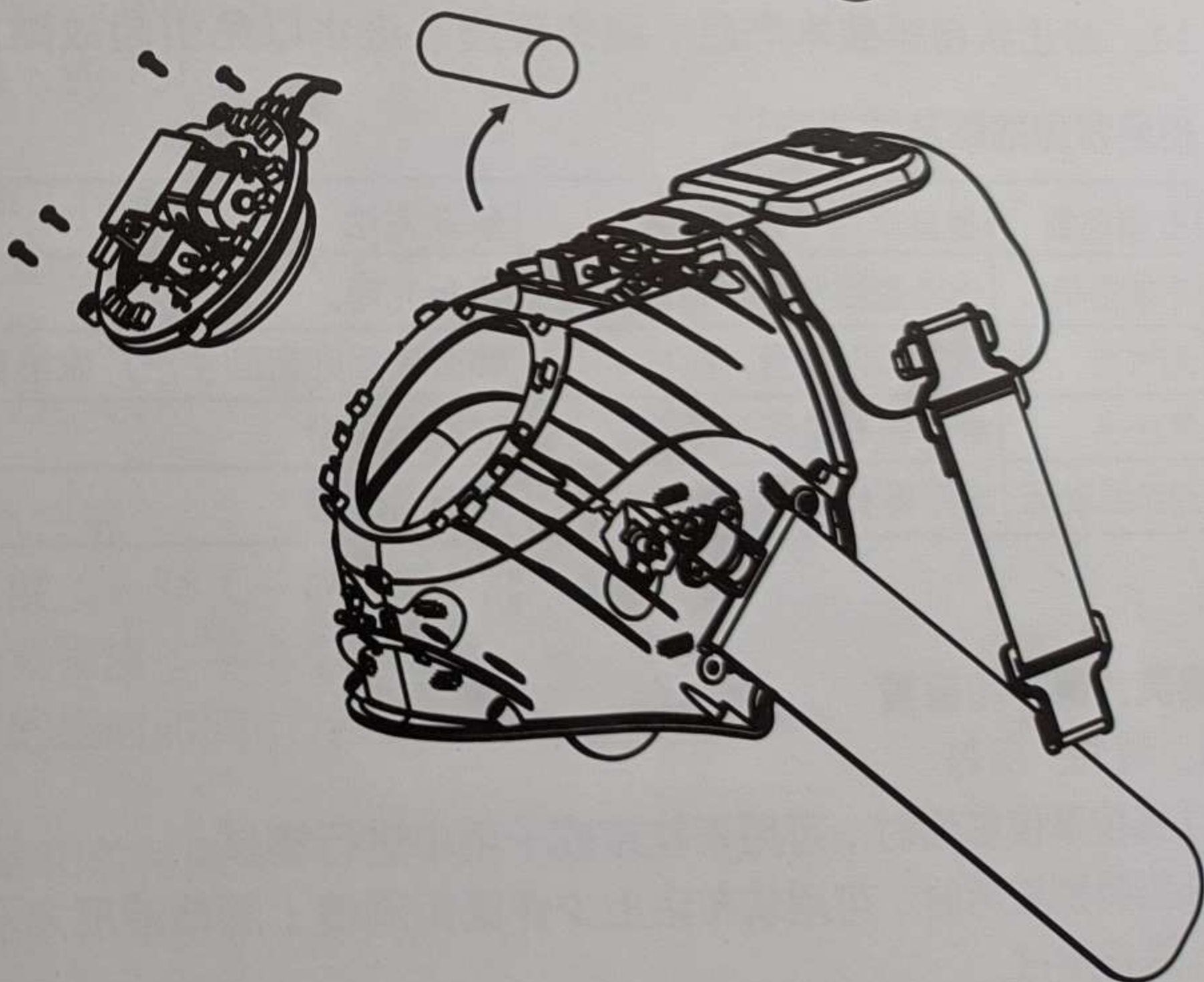

Шаг-4

Меры предосторожности 頁

1. Пожалуйста, внимательно прочтите и поймите все содержание руководства перед использованием данного продукта.
2. Пожалуйста, очистите это изделие перед его использованием.
3. Тем, кто не обладает способностью выражать сознание, например детям, запрещено его использовать.
4. Запрещается использовать людям с чувствительной кожей и тем, кто не чувствителен к теплу.
5. Беременные женщины, болезни сердца, аномальное кровяное давление, злокачественные опухоли, пациенты с нарушением мозгового кровообращения и острые заболевания.

Запрещается использовать его пациентам или другим лицам, получающим медицинскую помощь у врачей.

6. Если вы чувствуете недомогание или у вас ненормальная кожа во время использования, пожалуйста, немедленно прекратите его использование и обратитесь к врачу.

жизнь.

9. Запрещается использовать данное изделие в местах с высокой температурой, воспламеняемостью, электромагнитным излучением и влажностью.
10. Пациентам со спортивными растяжениями, острыми растяжениями связок, переломами ног или колена в области колена запрещается использовать
11. Запрещается разбирать и собирать данное изделие в частном порядке, чтобы избежать столкновений и попадания воды во избежание поломки.

использовать,

Используйте общие ошибки и решения 頁

Вопросы проверки явления неисправности	Решение
--	---------

Не может быть включен, достаточно ли заряда батареи? Сделайте зарядку.	
--	--

Есть ли какие-либо повреждения на поверхности безвоздушной подушки безопасности? Если он поврежден, он будет отправлен обратно производителю для	
--	--

ремонта. Ослаблена ли регулировка ремня малого давления воздуха?	
--	--

	Пожалуйста, затяните ремни
--	----------------------------

Низкая температура нагрева Ослаблена ли регулировка ремешка?	
--	--

	Пожалуйста, затяните ремни
--	----------------------------

Очистка, техническое обслуживание и хранение 頁

1. Очистка и техническое обслуживание 頁

1) Если массажер загрязнен, протрите его сухой мягкой тканью или сухим полотенцем.

2) Если он особенно загрязнен, используйте мягкую ткань с небольшим количеством медицинского спирта (концентрация спирта составляет 75%).

Протирать.

2. Продолжайте ㊦

- 1) Пожалуйста, храните в недоступном для детей месте.
- 2) Пожалуйста, не храните в месте под прямыми солнечными лучами, при высокой температуре или влажности.
- 3) Пожалуйста, храните его в сухом и проветриваемом месте.
- 4) Пожалуйста, не разбирайте, не ремонтируйте и не модифицируйте данное изделие без разрешения, что может привести к несчастным случаям или неисправностям.

Технические характеристики продукта 各

1. Название продукта и технические характеристики ㊦

Название: Сокровище Наколенника-Умный Массажер Для Наколенников ㊦

Номер модели: PG-2015F3 ㊦

Источник питания для зарядки: 5V DC1A (USB)

㊦ Батарея: 3,7 В постоянного тока 3000 мАч

Входная мощность: 10 Вт V

重 Количество: около 750 г ㊦

2. Нормальные условия труда:

Температура окружающей среды: +5°C~+40°C;

Относительная влажность: <80%;

Атмосферное давление: 86 кПа ~ 106 кПа;

3. Электрические характеристики ㊦

Температура нагрева: +38°C ~ +48°C (при температуре окружающей среды ниже 25°C)

Напряженность поверхностного магнитного поля: не менее 0,01Тл;

Время синхронизации массажера: 10-30 минут, с допуском ±10%.

4. Условия транспортировки и хранения -

Температура окружающей среды: -20°C ~ +55°C;

Относительная влажность: <93%;

Атмосферное давление: 50 кПа~106 кПа.

Наименование и содержание опасных веществ в продукте

Название детали	Опасные вещества					
	铅 (Pb)	汞 (Ртутный столб)	镉 (Cd)	Шестивалентная сеть (Cr(VI))	Многоавстралийский союз (ПБД)	Duoao Er Tea Co., Ltd. (ПБДЭ)
главный	X	●	●	●	●	●
компьютер деталь	●	●	●	●	●	●
пластиковый материал	●	●	●	●	●	●

Эта форма подготовлена в соответствии с положениями SJ/T 11364.

• Указывает, что содержание опасного вещества во всех однородных материалах компонента находится в пределах предела, указанного в GB/T26572.

Попросите о следующем.

X:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572.

И в настоящее время в отрасли нет зрелой альтернативы, которая отвечала бы требованиям стандарта GB / T 26572.



Цифры на этом логотипе указывают на то, что экологически чистый срок использования продукта при нормальном использовании составляет 10 лет. Некоторые части могут также существовать

отметка срока службы для защиты окружающей среды, и срок службы для защиты окружающей среды зависит от номера в отметке. В зависимости от модели изделие может быть

может включать в себя все вышеперечисленные компоненты, кроме хоста, пожалуйста, обратитесь к фактической конфигурации продаж продукта.

Гарантийный талон

Этот гарантийный талон предназначен для использования после покупки наколенника treasure-smart knee pad massager, и если требуется послепродажное обслуживание, пожалуйста, используйте его.

Будьте в хорошем состоянии.

Наколенники Treasure-Умные наколенники, массажер, детали послепродажного обслуживания следующие:

1. Благодаря покупке массажера для наколенников treasure-smart knee pad, пожалуйста, внимательно прочитайте руководство по эксплуатации изделия перед его использованием, и

Заполните форму ниже.

2. При использовании в нормальных условиях вы можете пользоваться бесплатной гарантией в течение одного года с помощью этого гарантийного талона. Человеческая ошибка в течение гарантийного срока,

Мы ремонтируем его бесплатно, но покупатель несет ответственность за запчасти и транспортные расходы.

3. При ремонте изделий по истечении гарантийного срока мы отремонтируем их бесплатно, но покупатель несет ответственность за запчасти и транспортные расходы.

Согласно соответствующим национальным правилам, при любом из следующих обстоятельств компания не предоставляет бесплатную гарантию, но может следовать за 

потребителем Готовы осуществить ремонт за полную плату:

(1) Ущерб, причиненный потребителями в результате неправильного использования, технического обслуживания или хранения;

(2) Ущерб, причиненный в результате демонтажа ремонтником, который не несет ответственности за три гарантии;

(3) Без трех пачек ваучеров и действительных счетов-фактур;

(4) Модель сертификата из трех упаковок не соответствует модели отремонтированного изделия или модифицирована;

(5) Ущерб, причиненный форс-мажорными обстоятельствами;

(6) Используется в коммерческих помещениях.

Название продукта: Сокровище Наколенника-Умный Массажер для наколенников ! _____

Модель: PG-2015F3 _____

Имя покупателя: _____

телефон: _____

адрес: _____

Дата покупки: _____

агент: _____