


Описание

V-образный массажер микротокового лифтинга предназначен для процедур в домашних условиях. Уникальный беспроводной аппарат, действие которого направлено против признаков старения кожи: великолепно уменьшает глубину морщин, заметно повышает упругость и тонус кожи, омолаживая и подтягивая ее изнутри, обладает прекрасным лимфодренажным эффектом, улучшает кровообращение и микроциркуляцию, также является прекрасным проводником в кожу питательных компонентов вашей ухаживающей косметики, которую вы будете наносить на кожу перед массажем. 3 уникальных грани массажера подходят не только для массажа лица, но и для массажа в области глаз, для массажа головы. А благодаря грани, имитирующей скребок Гуаша, вы можете полноценно насладиться профессиональным массажем дома.

Спецификация

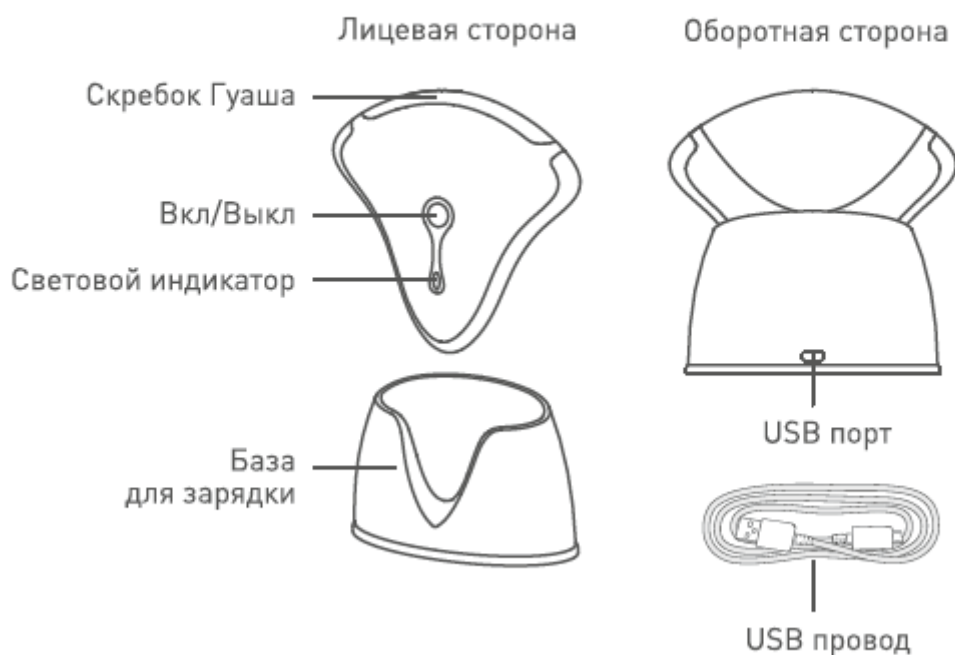

Функции

1. Для полной зарядки устройства необходимо 3 часа. Полная зарядка обеспечит до 10 часов работы в режиме с LED индикатором синего цвета, и 30 минут работы в режиме с LED индикатором красного цвета.
2. При низком заряде батареи LED индикатор начнет мигать красным цветом. Поместите массажер в базу для зарядки. Во время зарядки LED индикатор будет мигать синим цветом. Когда устройство полностью заряжено LED индикатор будет постоянно гореть синим цветом.
3. В устройстве есть функция нагрева, обеспечивающая температуру 45° C. Массажер отрегулирует оптимальную температуру после нанесения средств по уходу за кожей.
4. Если у вас возник дискомфорт при использовании массажера, прекратите использование и обратитесь к врачу.
5. Для предотвращения расхода батареи, устройство отключится автоматически после двух минут неиспользования.
6. Не используйте массажер во время зарядки.
7. Рекомендуется использовать массажер не более 1 минуты на каждом прорабатываемом участке кожи. После каждой минуты устройство сигналом оповестит о необходимости сменить участок воздействия.
8. Храните устройство в сухом, прохладном, вентилируемом месте, вдали от детей.
9. Рекомендуем удалять остатки средств с массажера каждый раз после использования. Для этого используйте специальную безвосровую ткань, которую можно многократно стирать. Так как массажер имеет уровень водонепроницаемости IPX5, то его можно промыть под струей воды, в случае сильных загрязнений.
10. В случае длительного неиспользования массажера, рекомендуется перезарядить батарею. Поместите массажер в базу для зарядки.

Способ применения

1. Для включения устройства нажмите и удерживайте в течение 1 сек. кнопку в центре (одно длинное нажатие).
2. Для переключения режима нажмите кнопку в центре еще раз (одно короткое нажатие). LED индикатор изменит цвет. Индикатор синего цвета обозначает стандартный режим с частотой вибрации 142 Гц. Индикатор красного цвета обозначает тепловой режим с частотой вибрации 200 Гц.
3. Выберите необходимый вам режим и начинайте процедуру. Перед началом процедуры убедитесь, что вы удалили макияж и другие загрязнения. Для лучшего эффекта можно использовать средства по уходу за кожей лица (крема, сыворотки, масла, гелевые маски и другие косметические ухаживающие средства на водной основе).
4. Грани массажера являются источником микротоков. Они имеют плавно изогнутые формы, благодаря которым массажер удобно использовать на любом участке лица и тела, учитывая анатомические особенности каждого лица. Прикладывайте массажер любой удобной вам гранью, чтобы он легко скользил по вашему лицу и другим участкам тела.
5. Для отключения устройства нажмите и удерживайте кнопку в центре около 1 сек. (длинное нажатие). После использования протрите устройство специальной салфеткой.

Рекомендации при использовании

Для достижения желаемого эффекта перемещайте массажер по лицу согласно анатомическому расположению мышц на лице (рис. 2).

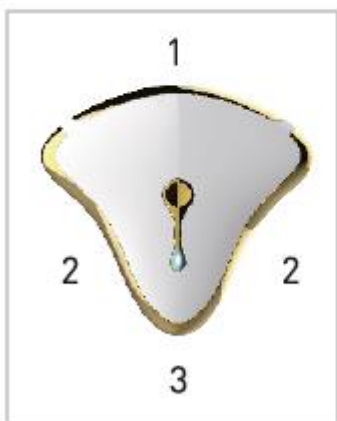


рис. 1



рис. 2

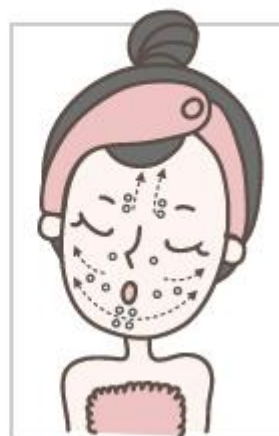


рис. 3

Часть 1, показанная на рис. 1, предназначена для массажа Гуаша. Согласно традиционной китайской медицине, данный массаж стимулирует кровообращение и помогает избавиться от неприятных ощущений (процедура очень популярна в Японии и Китае). Эта часть устройства может использоваться на любом участке вашего тела, если вы чувствуете боль или неприятные ощущения.

Части 2, показанные на рис. 1, предназначены для мышц вокруг щек, лба и области шеи. Следуйте рис. 3. и проведите движением под углом 45° снизу вверх. Для шеи и лба проведите движением снизу вверх.

Часть 3 предназначена для мышц вокруг глаз, подбородка и губ. Если следовать рис. 3, используя устройство на левой стороне лица, то для мышц вокруг глаз и губ проведите движением справа налево; на правой стороне лица, для мышц вокруг глаз и губ, проведите движением слева направо. Для мышцы вокруг подбородка, проведите снизу вверх.

Часть устройства 3, показанная на рис. 1, предназначена для массажа точек акупунктуры для снятия стресса. Используйте режим с синим индикатором. Выпуклой областью легко прикоснитесь и сделайте небольшой круг в точках, указанных на рис. 3.

Какой режим использовать и для чего

Режим с синим индикатором LED предназначен для:

- улучшения цвета лица;
- снятия отёчности и синяков под глазами;
- сужения пор;
- восстановления эластичности и тонуса кожи;
- способствует производству коллагена;
- стимулирует кровообращение и улучшает микроциркуляцию.



Режим с красным индикатором LED предназначен для:

- лифтинга кожи лица;
- лучшего проникновения в кожу косметических средств по уходу за счет дополнительного нагрева (сыворотка, крем, масло, маски, гель алоэ-вера и т.д.);
- сокращения морщин, поднятия мышечного тонуса;
- массажа лицевых мышц;
- способствует производству коллагена.



Противопоказания к использованию массажера

Беременность, онкологические заболевания, нервно-психические заболевания, так же не рекомендуется использовать в период острых заболеваний организма.

Часто задаваемые вопросы

Как долго по времени рекомендуется проводить процедуру массажа?

Рекомендуется использовать устройство ежедневно от 5 до 10 минут после утреннего и вечернего умывания. Максимально желаемый результат вы сможете достигнуть через 60 дней непрерывного использования.

Можно ли применять крема и гели при процедуре?

Да, при проведении процедуры желательно использовать косметические средства, которые подходят именно вам: крема, гели, сыворотки или использовать массажер после увлажняющих масок, например тканевых, насыщенных витаминами, аминокислотами и коллагеном, так как микротоковый массажер усиливает проникновение питательных компонентов глубже в кожу.

Моя кожа довольно чувствительна, могу ли я использовать устройство?

Да, устройство выполнено из нержавеющей стали в соответствии с международными стандартами, поэтому устройство безопасно в использовании и не вызывает аллергических реакций.

Можно ли использовать при лактации?

Да, использование при лактации безопасно для здоровья мамы и ребенка.

Можно ли использовать если стоят уколы красоты - ботокс, филлеры?

Наличие ботокса и филлеров не является противопоказанием к использованию массажера, но рекомендуется использовать массажер не раньше чем через 3 недели после проведения процедуры, при более раннем использовании эффект от уколов закончится быстрее.