

Мы благодарим вас за покупку данного устройства.

Внимательно ознакомьтесь с этим руководством перед использованием. Сохраните данное руководство для использования в дальнейшем.

Область применения:

Данный продукт можно использовать для проведения физиотерапевтического массажа до и после тренировки.

## **Содержание**

- Важная информация
- Введение в продукцию
- Комплектация
- Способ применения
- Использование
- Основные параметры
- Часто задаваемые вопросы
- Предупреждение
- Утилизация

## **Важная информация**

Во избежание рисков возникновения неисправностей, поражения электрическим током, травм, возгорания, смерти и повреждения оборудования внимательно ознакомьтесь со всеми рекомендациями и мерами предосторожности в данном руководстве перед использованием устройства.

## **Запрещено**

- Использование данного продукта несовершеннолетними и людьми с инвалидностью строго запрещено. В случае повреждения мышц проконсультируйтесь с врачом, прежде чем использовать этот продукт.
- Не используйте устройство на влажной или грязной коже. Продукт можно использовать на одетых частях тела. Пользователи могут осторожно надавить устройством на кожу, перемещать его к разным точкам, задерживаясь в каждой точке примерно на 60 секунд.
- Не используйте устройство в области выше шеи, а также на частях тела со слабыми мышцами или костями. Устройство можно использовать только на мягких тканях только при условии, если пользователь не испытывает боли или побочных реакций.
- Не используйте устройство на частях тела при наличии синяков, боли или побочных реакций.
- Не помещайте посторонние предметы в вентиляционное отверстие устройства.
- Не погружайте устройство в воду. Не допускайте попадания воды в вентиляционное отверстие.
- Не помещайте устройство в огонь или рядом с источниками тепла.
- Постарайтесь не бросать и не ронять устройство.
- Не разбирайте устройство.
- Существует риск зажать пальцы, волосы или другие части тела между корпусом и задней частью массажной головки. Не прикасайтесь к этим областям.
- Для детей не младше 8 лет. Детям не разрешается использовать, проводить очистку и обслуживание устройства без присмотра.

## Рекомендации

Пользователи, которые перечислены ниже, должны проконсультироваться с врачом перед началом использования.

- Беременные женщины
- Люди, которые используют кардиостимулятор
- Перенесли операцию в недавнем времени
- Люди, имеющие нарушения или заболевания позвоночника, суставов или костей
- Имеющие осложнения, вызванные другими заболеваниями (например, невралгия или повреждение сетчатки)

Текущие исследования посвящены влиянию вибраций во время тренировки на особые заболевания и могут уменьшить количество вышеупомянутых противопоказаний.

Практический опыт показал, что сочетание лечения и вибрационных процедур также может выступать в роли терапии при многих заболеваниях. Однако, данная терапия должна быть рекомендована врачами, специалистами или терапевтами, либо проводиться в их присутствии.

## Меры предосторожности


- После завершения зарядки отключите зарядное устройство.
- Не используйте устройство во время зарядки.
- Используйте устройство в соответствии с инструкциями в руководстве.
- Перед каждым использованием проверьте, можно ли использовать устройство в соответствии с условиями использования, указанными в руководстве.



Не прикасайтесь к этой части, чтобы избежать защемления, когда устройство включено, а массажная головка не установлена.

Не прикасайтесь к этой части, чтобы избежать защемления, когда устройство включено и массажная головка установлена.

## Схема продукции

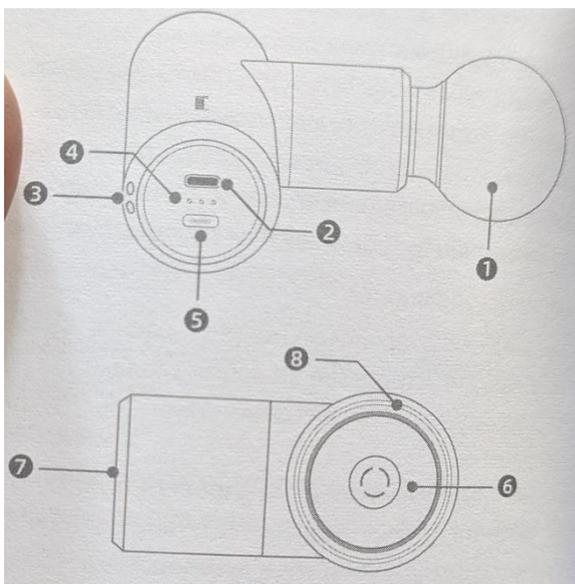


1. Массажная головка
2. Порт для зарядки
3. Индикатор питания
4. Отверстия для ремня
5. Кнопка включения ON/OFF
6. Кнопка переключения
7. Головка пистолета
8. Индикатор уровня интенсивности массажа

### Назначение массажного пистолета

- Помогает облегчить запаздывающую мышечную ломоту после физической нагрузки и снять напряжение в мышцах.
- Снимает ломоту и ооченение мышц в пояснице и плечах, вызванные длительным сидением и неправильной осанкой.
- Ежедневное применение массажа оказывает расслабляющее действие на все тело.

### Комплектация

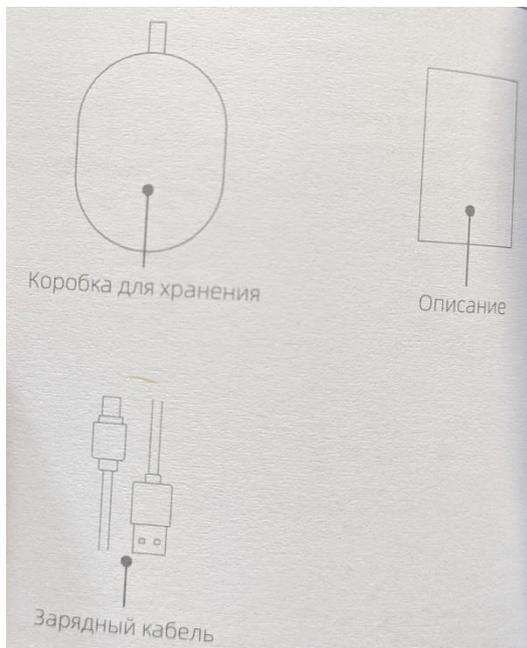

- U-образная головка: используется для массажа мышц вдоль позвоночника, шеи и плеч.
- Воздушная головка: имитирует хлопки ладонями для релаксации большинства мышц всего тела.
- Шаровидная головка: для больших групп мышц.

### Напоминание:


Все иллюстрации продукции, комплектации, пользовательского интерфейса и других, приведенные в данной инструкции, являются схемой и могут быть использованы лишь как справочный материал. В связи с обновлением и модернизацией продукции, натуральное вещество и схема продукции могут незначительно отличаться, просьба ориентироваться на какую продукцию.

### Способ применения

#### 1. Установка и разборка устройства

Установка:

Исходя из требования массажа выберите массажную головку и установите ее в круглое отверстие массажного пистолета.

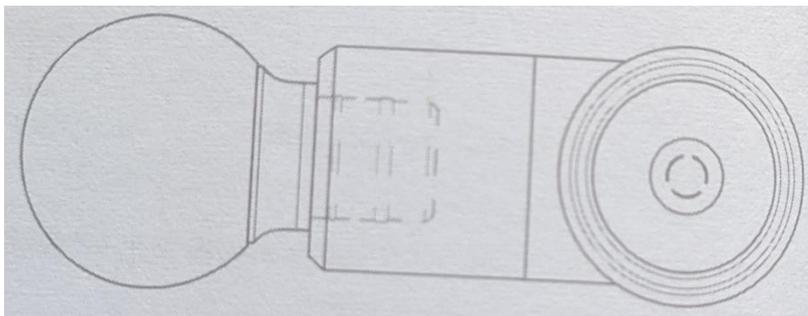

#### 2. Разборка:


При необходимости снимите массажную головку, вращая ее и вытягивая наружу.

### Предупреждение

Пожалуйста, устанавливайте и разбирайте массажную головку на режимах выключения устройства, чтобы обеспечить крепкую установку массажной головки, после этого снова включать данное устройство.

Никогда не регулируйте, не устанавливайте и не разбирайте массажную головку во время использования массажной головки во избежание травм.

### Использование

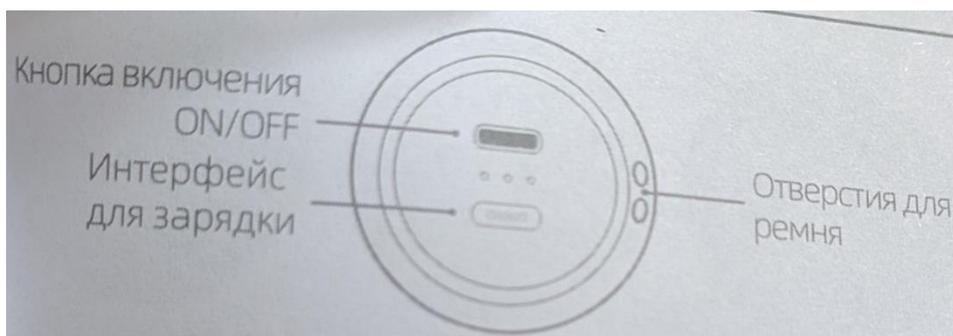

## Зарядка


Порт для зарядки расположен в нижней части массажного пистолета. Вставьте зарядный кабель в порт для зарядки, а затем подключите источник питания для зарядки массажного пистолета.

(Внимание: Не используйте устройство во время зарядки!)

## Кнопка включения ON/OFF:


Зажмите кнопку включения ON/OFF в нижней части на 2 секунды, чтобы включить массажный пистолет. В этот момент загорятся три индикатора заряда в зависимости от уровня заряда аккумулятора.

Нажмите на кнопку включения ON/OFF в нижней части, чтобы выключить массажный пистолет.

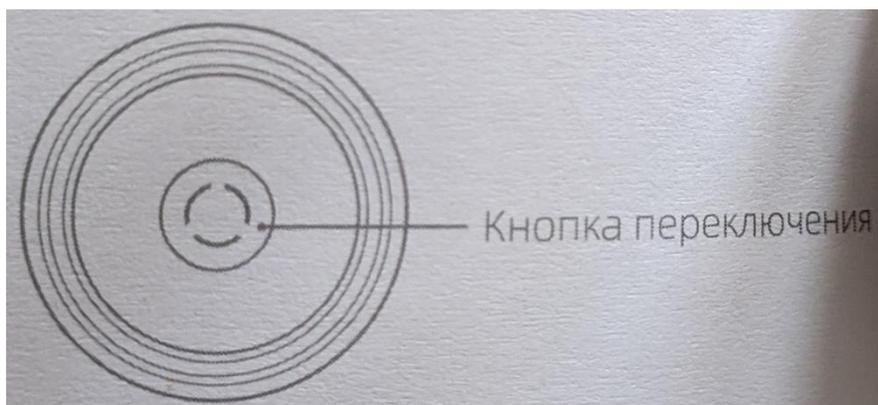

## Кнопка переключения:

После включения массажного пистолета используйте кнопку переключения для выбора необходимого уровня скорости. Удерживайте кнопку нажатой для переключения между уровнями I, II, III и IV.

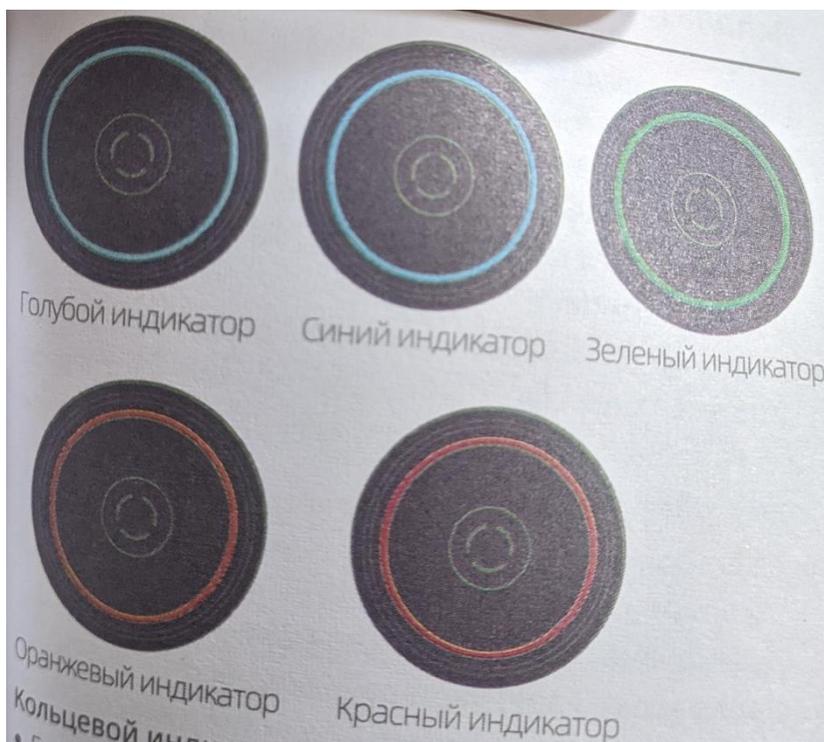

### **Кольцевой индикатор уровня интенсивности массажа:**

- Белый индикатор: небольшое воздействие (стимулирование мышц)
- Синий индикатор: чтобы облегчить боль и расслабить мышцы
- Зеленый индикатор: снятие напряжения (расслабление фасций)
- Оранжевый индикатор: глубокий массаж
- Красный индикатор: интенсивный массаж

### **Индикатор заряда:**

#### Состояние устройства

- Низкий уровень заряда: после включения массажного пистолета первый индикатор, расположенный рядом с головкой пистолета (далее - первый индикатор), непрерывно мигает.
- Оставшийся уровень заряда: при включении массажного пистолета соответствующий индикатор, начиная с первого индикатора в последовательности слева направо, постоянно горит белым светом.

#### Уровень заряда

- Если во время зарядки первый индикатор мигает белым светом, значит уровень заряда ниже 35%.
- Если во время зарядки первый индикатор постоянно горит белым светом, а второй индикатор мигает белым светом, значит уровень заряда больше 35%, но меньше 70%.
- Если во время зарядки первый и второй индикаторы постоянно горят белым светом, а третий индикатор мигает белым светом, значит уровень заряда составляет более 70%.
- Если во время зарядки три индикатора светятся постоянно, значит массажный пистолет полностью заряжен.

### **Рекомендации:**

- Выберите и установите подходящую массажную головку, затем включите устройство. Выберите необходимый уровень скорости, основываясь на личных ощущениях и попробуйте постепенно увеличивать скорость с низкой до высокой.
- Слегка надавите массажной головкой на расслабляемую мышцу и медленно перемещайте ее вперед-назад. Если в какой-то области возникают неприятные ощущения, уменьшите уровень скорости и держите головку в этом месте в течение 15-30 секунд.
- Массажный пистолет обладает сильным воздействием, поэтому не рекомендуется применять дополнительную силу, чтобы не повредить мышцы и кости.
- Рекомендуется использовать массажный пистолет на участках с напряженными мышцами и не использовать его на одной области более 60 секунд.
- Массажный пистолет автоматически перейдет в защитный режим и отключится после непрерывного использования в течение 10 минут. В этом случае включите массажный пистолет еще раз, если вы хотите использовать его.

Рекомендуемая продолжительность использования – 10 минут. Если все еще ощущается болезненность мышц, время массажа может быть увеличено.

- Рекомендуемая продолжительность однократного использования не должна превышать 15 минут, в то время как максимальная продолжительность непрерывного использования - 30 минут.
- Используйте продукт в строгом соответствии с руководством.

## Основные параметры

- Название: Массажный пистолет мини YUNMAI
- Модель: YFGM 352
- Входное напряжение: 5В/9В... 2А
- Параметры интерфейса: Type-C
- Объем аккумулятора: 2600 мАч
- Тип батареи: Перезаряжаемая литиевая батарея
- Вес: 430г
- Габариты: 144 × 41 × 80mm

## Часто задаваемые вопросы

### *Ошибка во время запуска*

#### **1. Высокая температура:**

При использовании в среде с температурой выше 40°C на массажном пистолете может сработать защита от перегрева, что приведет к сбою во время запуска устройства.

#### **Решение:**

Поместите массажный пистолет в среду с температурой ниже 40°C на 2 часа перед тем, как включить его.

#### **2. Емкость батареи равна "0":**

Когда аккумуляторная батарея разряжена, в случае если пользователь не заряжает ее в течение длительного времени, на батарее активируется защита от разрядки, которая также называется защитой от чрезмерной разрядки.

Массажный пистолет не сможет нормально работать, если его включить в это время.

#### **Решение:**

Не выключайте массажный пистолет, затем подключите зарядное устройство (адаптер питания), и устройство автоматически перейдет в состояние зарядки. Когда пистолет будет полностью заряжен, отключите зарядное устройство, массажный пистолет сможет работать в нормальном режиме.

### *Ошибка зарядки*

#### **Массажный пистолет перегревается:**

Когда температура корпуса массажного пистолета слишком высока, вы не сможете выполнить зарядку, подключив его к зарядному устройству.

#### **Решение:**

Поместите массажный пистолет в среду с температурой ниже 40°C на 2 часа перед началом зарядки.

**Использование устройства в соответствии с рекомендациями может значительно продлить срок его службы.**

## **Рекомендации:**

- Не бросайте и не роняйте устройство во время использования,
- Максимальное время непрерывной работы должно составлять не более 30 минут.
- Выполняйте зарядку устройства раз в два месяца, если оно не используется в течение длительного времени.

## **Предупреждение**

- Только для использования внутри помещений!
- Во время зарядки аккумулятор должен находиться в хорошо вентилируемом месте.
- Аккумулятор должен быть утилизирован в целях безопасности.
- Этот прибор могут использовать дети в возрасте от 8 лет и старше, а также лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и знаний, если они находятся под наблюдением или инструктированы относительно безопасного использования прибора и осознают связанные с этим опасности. Не разрешайте детям играть с прибором. Уборка и обслуживание не должны производиться детьми без присмотра.
- Дети должны находиться под наблюдением для обеспечения того, чтобы они не играли с прибором.
- Эта маркировка указывает на то, что данное изделие нельзя выбрасывать вместе с другими бытовыми отходами на всей территории ЕС. Для предотвращения возможного ущерба окружающей среде или здоровью человека в результате неконтролируемого удаления отходов, утилизируйте их ответственно, чтобы содействовать устойчивому повторному использованию материальных ресурсов.

Чтобы вернуть использованное устройство, пожалуйста, используйте систему возврата и сбора или свяжитесь с розничным торговцем, у которого было куплено изделие. Они могут сдать это изделие на экологически безопасную переработку.

## **Утилизация**

Не выбрасывайте это устройство вместе с обычными бытовыми отходами, когда его эксплуатационный срок закончился. Поместите его в специально предназначенный мусорный контейнер или отправьте в центр послепродажного обслуживания, где специалисты выполнят его утилизацию экологически безопасным способом.

## **Техническое обслуживание, чистка, хранение, транспортировка**

- Чистите устройство влажным полотенцем и протрите насухо мягкой тканью.
- Поместите устройство в предоставленную упаковочную коробку во время хранения или транспортировки.
- Это устройство следует хранить в сухом, хорошо вентилируемом месте, не подверженном воздействию коррозии.
- Устройство должно быть размещено на высоте не менее 250 мм от пола, максимальное количество объектов на нем должно быть не более 5.
- Это устройство необходимо упаковать и хранить надлежащим образом, если оно не используется в течение длительного времени. В данном случае устройство следует заряжать каждые 6 месяцев.
- Это устройство можно перевозить в автомобиле, поезде, по морю или по воздуху.

- Во время транспортировки осторожно и надежно закрепите устройство в вертикальном положении, чтобы избежать повреждений из-за сильной вибрации, ударов, перекачивания или падения.
- Необходимо также принять меры по предотвращению попадания влаги.



Посетите <https://www.iyunmai.com> для получения дополнительной информации.

Эл. почта: [support@iyunmai.com](mailto:support@iyunmai.com)

Instagram: @yunmaiglobal

Facebook: @yunmaipr

Производитель: Shenzhen Yunmai Technology Co., Ltd.

Адрес компании: комната#19А, здание Чивань,

№0.86-я Чиваньроуд, район Наньшань, Шэньчжэнь, Китай