

Части продукта



Массажная подушка



Адаптер постоянного тока

основные параметры

Модель продукта: LF-YK006

Вход: 12 В = 2А (макс.)

Емкость аккумулятора: 2600 мАч, 19,24 Втч (7,4 В)

Вес продукта нетто: 1,45 + /-0,2 кг

Характеристики продукта

Подходит для многих частей тела, особенно для плеч и шеи, нижней части спины, живота, конечностей (рук, ног).



Плечи и шейная часть



Нижняя часть спины



ЖИВОТ



конечности

Техническое обслуживание продукта

Место хранения

Пожалуйста, поместите его в оригинальную коробку или в безопасное, сухое и проветриваемое место, чтобы избежать острых царапин и массажа.

Поверхность подушки.

吉 ち

• Не замачивайте массажную подушку в каком-либо растворе для чистки. • При чистке просто протрите мягкой и слегка влажной губкой.

Способ работы и описание функций

Подготовьте перед использованием

- Проверьте изделие на наличие повреждений.
- Поместите изделие на ту часть тела, которую вы хотите помассировать, и убедитесь, что положение устойчивое и удобное.

Способ работы :



Состояние нагрева :

- Нажмите и удерживайте кнопку в течение 1,5 секунд, и устройство включит массаж.
- Нажмите кнопку, чтобы включить функцию нагрева. В это время поверните массажную головку, и она будет отображаться красным цветом.;
- Нажмите на кнопку еще раз, чтобы отключить функцию нагрева.
- Начиная с начала вращения массажного шарика, каждую минуту массажный шарик будет автоматически вращаться в обратном направлении и массировать. • Устройство автоматически отключит питание через 15 минут или нажмите и удерживайте клавишу в течение 1,5 секунд, чтобы выключить в любое время в рабочем состоянии

Источник энергии,

Состояние индикатора

- Низкий заряд батареи: белый индикатор быстро мигает при зарядке: дыхание белым светом
- При полной зарядке: белый индикатор выключен при работе: белый индикатор всегда включен



Инструкции по зарядке

- Пожалуйста, полностью зарядите его перед первым использованием;
- При зарядке, пожалуйста, вставьте вилку в розетку адаптера постоянного тока и убедитесь, что вилка вставлена в розетку;
- Когда устройство находится в состоянии зарядки, зарядка прекратится во время работы устройства. После того, как устройство перестанет работать, состояние зарядки будет восстановлено.;
- Полная зарядка аккумулятора занимает 3-4 часа, и время зарядки не должно быть слишком долгим, чтобы не повлиять на срок службы аккумулятора.;
- Рекомендуется использовать не более двух циклов (по 30 минут) каждый раз.

В целях соблюдения законов, нормативных актов и других требований Китайской Народной Республики, связанных с ограничением содержания опасных веществ в электрических и электронных изделиях,

Компания классифицирует вредные вещества в этом продукте по частям и заявляет следующее:

Название и содержание опасных веществ в продукте

Название детали	Опасные вещества или элементы					
	铅 Pb	汞 Hg	镉 Cd	Шестивалентный хром Cr(VI)	Канцерогенные полиароматические углеводороды ПАУ	Фталаты ФТДЭ
R1-R3	X	○	○	○	○	○
Штыри гнезда	X	○	○	○	○	○
Седина в массажной головке и серебряная керамика пиротехнический фильм	X	○	○	○	○	○

Эта форма подготовлена в соответствии с положениями Директивы 2011/65/EU (RoHS).

○:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在2011/65/EU (RoHS)

Предельные требования, указанные в директиве, следующие.

X:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出2011/65/EU

Предельные требования, предусмотренные директивой (RoHS). (Примечание:

Детали, отмеченные в таблице буквой "X", изготовлены из медного сплава. Содержание свинца в медном сплаве в настоящее время обусловлено технологией или По экономическим и другим причинам временно невозможно заменить или уменьшить количество вредных веществ.)



Этот знак также указывает на период использования продукта и его частей для защиты окружающей среды, когда некоторые части не Тот же период (использования для защиты окружающей среды будет отмечен отдельно (например, у модуля аккумуляторных элементов будет другой период). Логотип прикреплен к его продукту). Этот период использования для защиты окружающей среды применим только к работе в условиях, указанных в руководстве по эксплуатации изделия.

Этот документ относится к электронным и электротехническим изделиям, импортируемым или продаваемым на территории Китайской Народной Республики.

Меры предосторожности при утилизации продукта

Литий-ионный аккумулятор, используемый в данном изделии, является ценным ресурсом, который может быть переработан. Пожалуйста, утилизируйте его после использования.

Литий-ионный аккумулятор извлекается и передается профессиональному учреждению, которое может перерабатывать и регенерировать аккумуляторные батареи для дальнейшей переработки. После извлечения аккумулятора прибор должен быть выключен.

Процесс разборки

Первый шаг: Используйте другие безопасные инструменты, такие как серебро или плоскогубцы, чтобы расстегнуть поясничную матерчатую сумку.

Полностью снимите тканевую крышку, обнажив встроенную губку и массажную


головку. Шаг 2: Разрежьте губку в положении, показанном стрелкой на рисунке 1

Отверните винты на внешней крышке, показанные на рисунке 2, с помощью отвертки

Третий шаг: Извлеките аккумулятор в том месте, где надрезана губка, и отсоедините интерфейс от кабеля материнской платы, как показано на рисунке 3.


(Как показано в заголовке

Рисунок 1

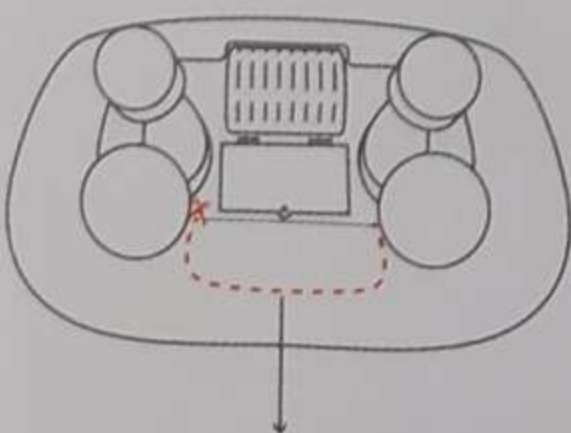


Разрежьте бисквит по этой пунктирной линии

Рисунок 2

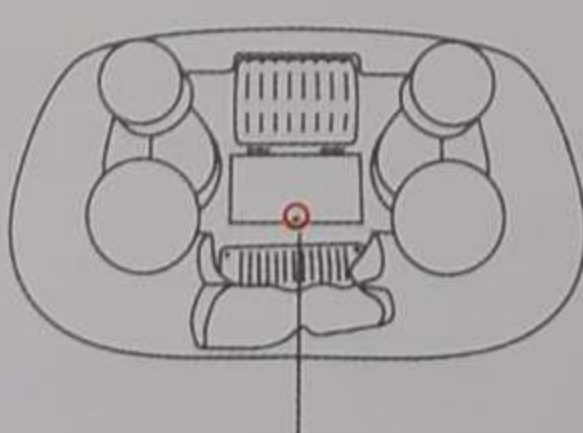

Выверните винты из внешней крышки

Рисунок 3

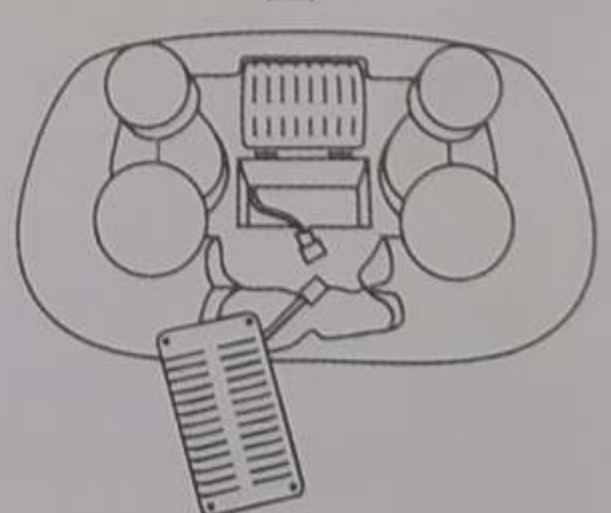

Диагностика

Ненормальная ситуация	Возможная причина	Решение
Не удается загрузиться	Батарея разряжена	Подключите блок питания для зарядки
	Неправильный метод загрузки	Нажмите и удерживайте кнопку сердца в течение 1,5 секунд
Внезапная остановка работы	Батарея разряжена	Подключите блок питания для зарядки. Нажмите
	Время массажа превышает 15 минут непрерывное	и удерживайте кнопку сердца, чтобы перезапустить
	использование в течение слишком долгого времени, продукт Защита от перегрева	После того как продукт остынет, включите его снова
	Прикладывая слишком много усилий, массажная головка застревает	Снимите массажную головку и снова включите ее

Запрещенные вопросы

- Те, кто получает лечение у врача или кто плохо себя чувствует
- Пациенты с гипертонией, заболеваниями сердца, церебральным атеросклерозом и церебральным тромбозом
- Люди со злокачественными опухолями
- Беременные женщины и женщины в период менструации
- Страдающий остеопорозом
- Те, кто использует кардиостимулятор или имплантированное медицинское устройство
- Люди с острыми заболеваниями
- Несовершеннолетние и лица с физическими и психическими расстройствами
- Не используйте его более 30 минут каждый раз
- Если тканевый чехол поврежден, не используйте это изделие
- Если на изделие попадут волны жидкости, не используйте это изделие
- Если во время использования возникает ненормальная или сильная боль, не используйте этот продукт
- Если во время использования будут обнаружены какие-либо механические неисправности или ненормальные условия, пожалуйста, не используйте его.
- Не используйте устройство (зарядку) при возникновении молнии
- Не вставляйте и не вынимайте вилку из розетки мокрыми руками
- Не допускайте, чтобы дети играли на изделии

Меры предосторожности при использовании

- Когда аккумулятор полностью зарядится, пожалуйста, отсоедините кабель для зарядки.
- Не используйте изделие во влажной или запыленной среде, чтобы избежать выхода изделия из строя.
- Не размещайте изделие рядом с электронагревателем, возле плиты или под прямыми солнечными лучами.
- Не садитесь на изделие.
- Не мойте изделие непосредственно и не заливайте его в воду, чтобы избежать повреждения изделия коротким замыканием.
- Если шнур питания или вилка повреждены, пожалуйста, не используйте их и своевременно обратитесь в службу послепродажного обслуживания для ремонта и проверки.
- Не вставляйте посторонние предметы ни в какие отверстия изделия.
- Не сжимайте и не царапайте данное изделие острыми предметами.
- Пожалуйста, не используйте его во время вождения автомобиля, чтобы избежать столкновения с кузовом при аварии.
- Прибор имеет нагревательную поверхность. Люди, которые не чувствительны к теплу, должны быть внимательны при его использовании.

Описание гарантии

Правила гарантии

Начиная со следующего дня после подписания продукта, у продукта произошел сбой производительности хоста, не вызванный человеком, и он прошел через сервисный центр. Кроме того, вы можете воспользоваться услугой возврата в течение семи дней, замены в течение пятнадцати дней и бесплатной гарантией на один год.

Негарантийные правила

- Продукты, идентификационная информация о продукте которых (например, серийный номер и информация о модели) была изменена, уничтожена или уничтожается.
- Ущерб, причиненный умышленно или по небрежности людей, включая использование в ненормальных условиях, несоблюдение инструкций, Ущерб, причиненный в результате использования и т.д.
- Повреждения, вызванные ненормальным напряжением (например, чрезмерным напряжением или аварийным отключением питания).
- Из-за разборки и технического обслуживания оборудования персоналом или сервисными агентствами, отличными от авторизованных сервисных центров, Ущерб, вызванный модификацией.
- Ущерб, причиненный форс-мажорными обстоятельствами (такими как пожар, наводнение, землетрясение, удар молнии, война и т.д.).
- Другие неисправности, которые не вызваны оригинальным продуктом, включая, но не ограничиваясь этим, использование неоригинальных аксессуаров. Вызванный сбоем, сбой, вызванный несовместимостью с третьей стороной.
- Аксессуары, расходные материалы и конструктивные детали не обеспечивают гарантийное обслуживание.
- Физические повреждения, царапины или изменения внешнего вида поверхности оборудования.

Гарантийный талон на изделие

Модель продукта		Имя клиента	
Наименование товара		Контактный номер	
Дата покупки		Место покупки	
Номер счета-фактуры		Контактный адрес	

Модель продукта		Имя клиента	
Наименование товара		Контактный номер	
Дата покупки		Место покупки	
Номер счета-фактуры		Контактный адрес	

* Эта форма применима к продуктам с соответствующими правилами использования в трех упаковках. Этот гарантийный талон эквивалентен сертификату на три упаковки. Пожалуйста, храните его в безопасности.

Производитель: Xiamen Lefan Health Technology Co., Ltd.

Адрес: № 31, 2-я дорога Аньлин, Парк высоких технологий, район Хули, Сямынь

Сеть: www.lfwellness.cn

Горячая линия обслуживания: 400-101-8969

