


hiPee

Введение продукта

Эльф Хипи Цзяо Цзы напоминает плохие позы, такие как горбун, с помощью мониторинга в реальном времени и сопоставляет их с "веселым соматосенсорным плаванием". "Драма" и "курсы профессиональной подготовки по осанке", и стремятся позволить пользователям попрощаться с традиционной принудительной осанкой и помочь пользователям Формируйте мышечную память, вырабатывайте привычку выпрямляться и коренным образом решайте проблему плохой осанки.

Это изделие состоит из хоста и ошейника ↗

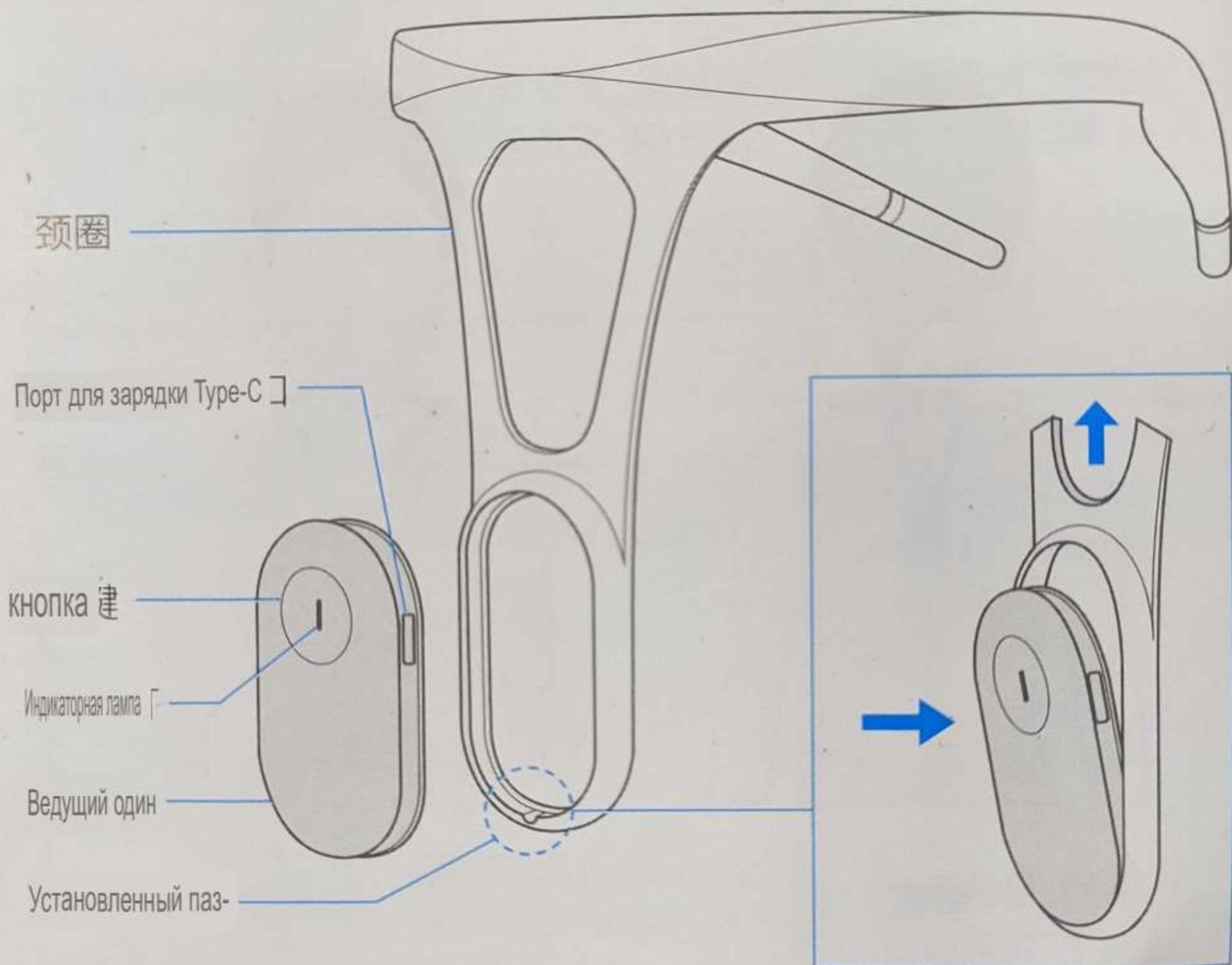


Инструкции по сборке ↗

Передняя часть хоста устройства (сбоку от кнопки) обращена вперед. Как показано на рисунке выше, совместите горизонтальную полосу в нижней части хоста с воротником. Монтажная канавка в нижней части загружается, и хомут при монтаже тянется вверх (хомут эластичен и может быть натянут, но не Используйте слишком большое усилие) и одновременно отрегулируйте положение узла, чтобы убедиться, что узел расположен горизонтально перпендикулярно верхней части предварительного кольца.

佩戴

Правильный способ ношения

Снаряжение следует носить близко к центру задней части шеи, а левое и правое положения переднего конца воротника должны быть строго согласованы.

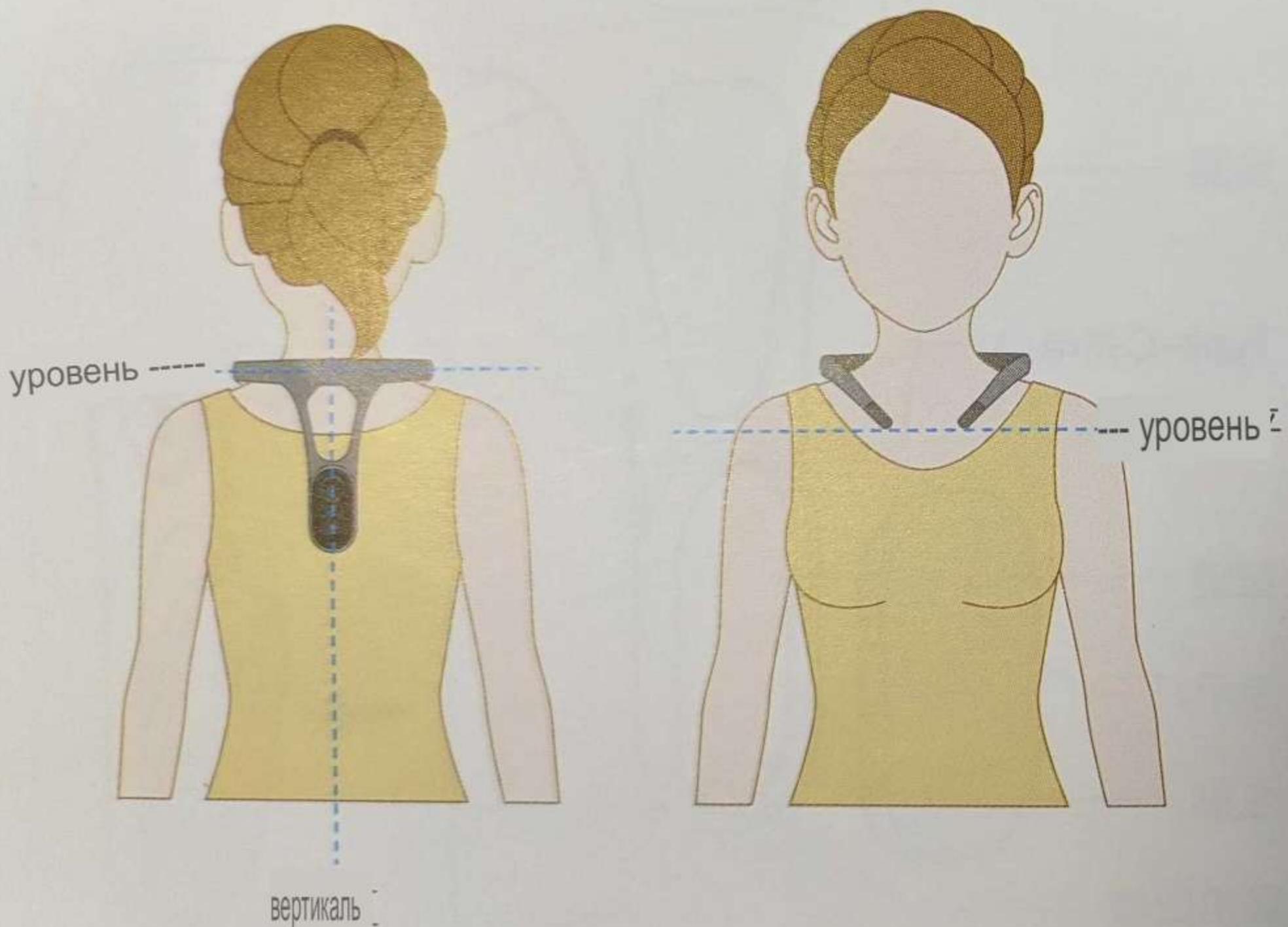

⚠ Внимание! Следующие условия могут привести к неточным напоминаниям во время тестирования:

1. Снаряжение не надевается близко к телу, например, снаружи плотной одежды, такой как свитера и куртки.
2. Положение сборки основного блока и схема горловины не совпадают, и сборка перекошена или перевернута.

Жизненный цикл

Выработайте привычки к хорошей осанке за 21 день


Цикл	Описание	Предложения по настройке
Переживите адаптационный период (День 1 ~2)	<p>В первые 2 дня постарайтесь защитить:</p> <p>Сохраняйте правильную позу в течение 30 минут</p>	<p>Угол напоминания: свободный ↘</p> <p>Задержка напоминания: 30 секунд ↗</p>
Период привыкания к привычкам (3-й ~7-й день)	<p>Развивайте привычки к ношению и бросайте вызов:</p> <p>Поддерживайте правильную осанку каждый день</p> <p>1 час ↗</p>	<p>Угол напоминания: умеренный ↗</p> <p>Задержка напоминания: 30 секунд ↗</p>
Период стабильного укрепления (7-й ~ 21-й день)	<p>Постепенно формируйте мышечную память,</p> <p>Настаивайте на том, чтобы быть правильным каждый день</p> <p>Поза в течение 2 часов ↗</p>	<p>Угол напоминания: строгий ↗</p> <p>Задержка напоминания: 1 минута ↗</p>

Напоминание:

Приведенные выше рекомендации по использованию являются идеальным эффектом, конкретный цикл использования и метод настройки могут варьироваться от человека к человеку.


Инструкция по применению

01-Оборудование включено

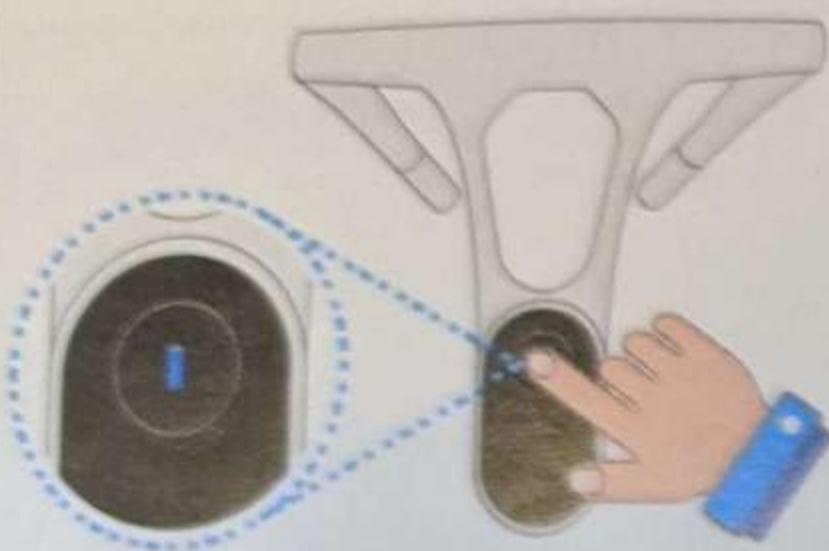

Нажмите и удерживайте кнопку в течение 3 секунд, устройство завибрирует и включится


02-Связующее устройство

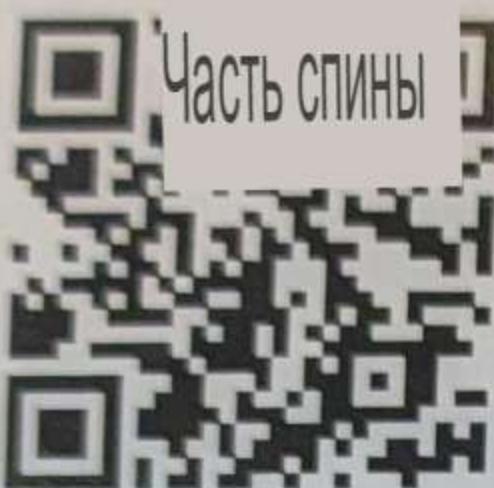

Отсканируйте этот QR-код в WeChat, чтобы перейти к общедоступной учетной записи. Следуйте инструкциям, чтобы привязать устройство

Пожалуйста, убедитесь, что WeChat получил разрешения на подключение по Bluetooth и определение местоположения

03-Настройки напоминания

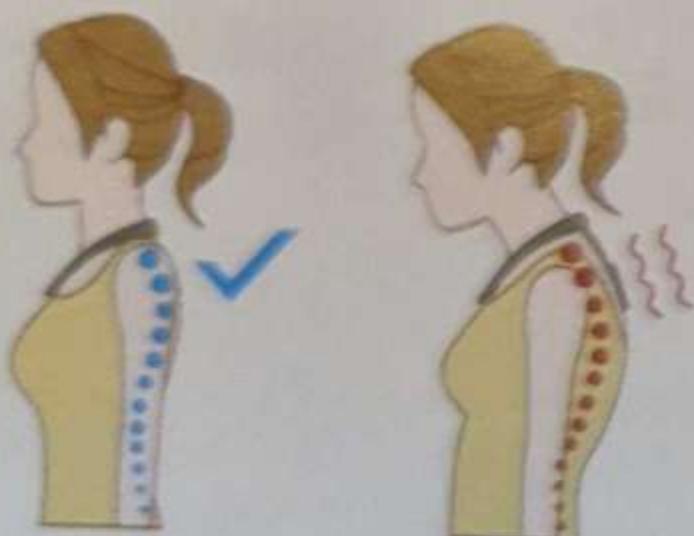

Наденьте устройство и следуйте инструкциям мини-программы, чтобы настроить его Правильная осанка, угол напоминания, задержка напоминания; После завершения, когда поза неправильная или сидячая, Устройство будет "вибрировать, чтобы напомнить"

04-Сделайте перерыв



Никаких напоминаний в течение 30 минут



Дважды щелкните по кнопке, чтобы приостановить напоминание на 30 минут, Дважды щелкните кнопку еще раз в течение указанного периода, чтобы восстановить напоминание

05-Лучшие результаты

Мини-программа содержит профессиональные "курсы коррекции осанки" и веселые "игры с упражнениями", на которых настаивают каждый день. Упражнение может укрепить слабые мышцы, и вам будет легче поддерживать правильную осанку после того, как мышцы станут сильнее!

Инструкции по эксплуатации и обратной связи

Состояние оборудования	Инструкции по эксплуатации	Вибрационная обратная связь	Описание индикаторной лампы
включать	Нажмите и удерживайте кнопку 3 секунды	Полная мощность: Включается после 1 продолжительного удара Низкий заряд батареи: Выключение после 1 длительного шока	Полная мощность: Режим напоминания мигает через 5 секунд при длительном горении индикатора Режим покоя, фиолетовый индикатор мигает после 5 секунд длительного горения Низкая мощность: мигает красный индикатор Низкий заряд батареи: выключите после 2 красных огней
выключать	После загрузки нажмите и удерживайте кнопку в течение 3 секунд	1 короткий удар Нажмите	*
Привязан к апплету привязки Bluetooth	Стационарное оборудование	2 коротких толчка	*
Запись стандартных настроек апплета	Начать запись/запись успешно:	Начать запись/запись успешно: 2 коротких толчка	Начните запись: западный индикатор быстро мигает Успешная запись: динамическое мигание
поза	Стандартная поза	2 коротких толчка	*
Режим напоминания	Плохая осанка Когда это случилось	По умолчанию через 3 секунды Короткий удар 3 раза и повторите	*
Напоминание о сидячем образе жизни	3 длительных толчка после 1 часа сидячего образа жизни	*	*
В режиме покоя дважды нажмите кнопку для 1 короткого удара	В режиме покоя	2 коротких толчка	*
Напоминание о восстановлении	Дважды щелкните по кнопке	*	*
Просмотр оборудования	Короткое нажатие на кнопку	*	Режим напоминания: "Индикатор магазина загорается" один раз / Режим отдыха: 1 раз
Текущее состояние		*	/ Зарядка: Мигает красный индикатор
заряжать	Подключение к источнику питания	*	Зарядка завершена: 

внимание

- Когда мини-программа недоступна, если вы хотите записать свою позу, вы можете нажать и удерживать кнопку в течение 8 секунд (в середине будет вибрация, пожалуйста, не отпускайте). Оборудование дважды вибрирует, чтобы начать запись, и оборудование дважды вибрирует после завершения записи, указывая на то, что стандартная поза успешно записана.
- Метод вибрации напоминания можно изменить через "настройки" в мини-программе.
- Когда Bluetooth подключен, короткий 2-кратный звуковой сигнал указывает на то, что устройство найдено. нажмите кнопку устройства для привязки; введите снова Когда апплет установлен, устройство может быть подключено напрямую.
- Оборудование и мини-программы постоянно обновляются и модернизируются. Пожалуйста, обратитесь к актуальной версии для конкретных операций.


Инструкции по зарядке

1. Во время зарядки, пожалуйста, нажмите на заднюю часть основного блока устройства и извлеките основной блок из ошейника.(Как показано на рисунке @@)
2. Это устройство использует порт Type-C для зарядки, а адаптер питания должен соответствовать требованиям GB 9706.1:
Номинальный вход: 5 В = 1А ↗
3. После зарядки, пожалуйста, отключите источник питания как можно скорее, чтобы прекратить зарядку, чтобы избежать повреждения ключевого аккумулятора, вызванного перезарядкой. Всегда, пожалуйста, вытрите руки перед подключением и отключением адаптера питания.
4. Батарея оборудования не подлежит замене, и когда срок службы батареи истечет и ее нельзя будет зарядить, изделие будет утилизировано и утилизировано. Продукты должны утилизироваться в соответствии с правилами утилизации электронных продуктов, установленными государством.

Время зарядки: около 1,5 часов ⏱

Зарядка: 【Национальный стандарт】 ⓘ

Зарядка завершена: долгая и яркая 💡

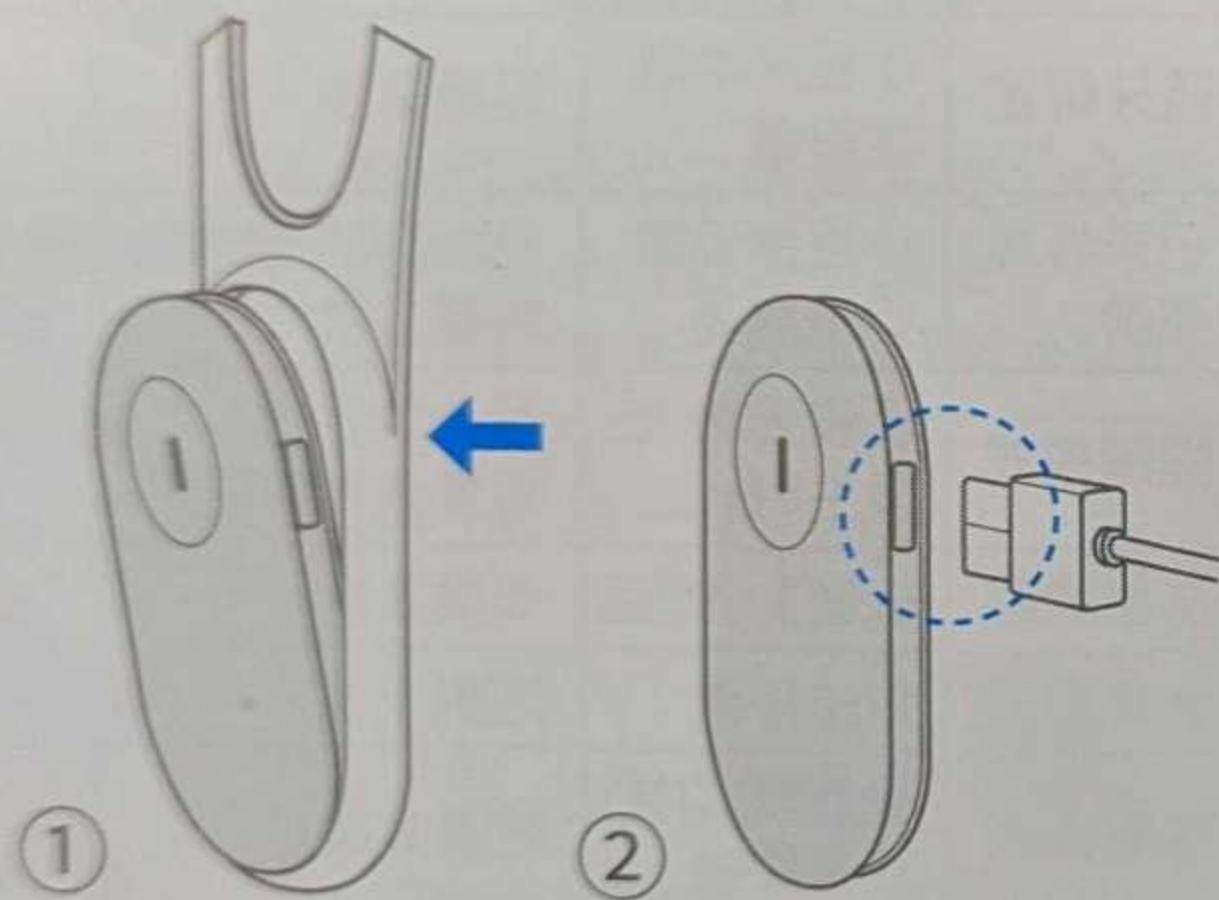

Меры предосторожности по технике безопасности ⓘ

1. Чтобы использовать этот продукт безопасно и правильно, чтобы предотвратить причинение вреда вам и другим, пожалуйста, внимательно прочтите это руководство.
2. Этот продукт рекомендуется для детей, подростков и взрослых старше 3 лет.
3. Корпус кольца предварительного изображения оборудования мягкий, пожалуйста, храните его в недоступном для детей месте, чтобы дети не съели его по ошибке.
4. Не сгибайте и не тяните за предварительное кольцо оборудования слишком сильно.
5. Не используйте данное изделие в ситуациях с сильными электромагнитными полями.
6. Использование аксессуаров, датчиков или кабелей, которые не входят в комплект оборудования и систем, может привести к установке аксессуаров, датчиков или кабелей, которые не входят в комплект оборудования и систем. ↳
Увеличивается излучение оборудования или системы или снижается помехозащищенность.

7. Даже если другое оборудование соответствует требованиям к запуску соответствующих национальных стандартов, оборудование или система все равно могут Нарушаться другим оборудованием.
8. Пожалуйста, соблюдайте рабочую температуру и влажность, описанные в данном руководстве (температура -10 °C ~ +55°C; относительная влажность) <80%) и температура хранения и влажность (температура -10 °C ~ +50°C; относительная влажность<80%) составляют В противном случае система может не соответствовать заявленным техническим характеристикам.
9. Основная батарея не подлежит замене, пожалуйста, не разбирайте и не ремонтируйте ее самостоятельно. если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, свяжитесь с отделом послепродажного обслуживания. 10. Избегайте удерживания или сильного встряхивания данного изделия; избегайте высокой температуры, влажности, пыли и прямых солнечных лучей.

Очистка и техническое обслуживание

Уборка хоста

1. Основной корпус этого оборудования не является водонепроницаемым, пожалуйста, не промывайте водой для очистки; если есть пыль или грязь, его можно использовать Протрите оборудование чистой сухой тканью или отжатой влажной тканью.
2. При очистке обязательно выключите оборудование и отсоедините адаптер питания.
3. Не используйте для чистки никаких моющих средств или моющих средств. если есть грязь, которую трудно очистить, вы можете использовать ее. Протрите дезинфицирующими средствами, содержащими летучие вещества, такие как спирт. Хранить в прохладном и темном месте и ждать, пока вещество После того как он полностью испарится, установите его на предварительный чертеж.

Очистка круга

1. Ошейник можно разобрать отдельно, помыть и почистить; после чистки, пожалуйста, храните его в прохладном и темном месте и тщательно высушите. Установите оборудование.
2. Не используйте для протирания дезинфицирующие средства, содержащие летучие вещества, такие как спирт, чтобы избежать повреждения аксессуаров. коррозия.

Техническое обслуживание аккумуляторной батареи

1. Пожалуйста, держитесь подальше от огня или источников тепла и не бросайте брошенные машины или батареи в огонь.;
2. Отключите источник питания как можно скорее после завершения зарядки, чтобы избежать перезаряда и повреждения аккумулятора;
3. Когда батарея разряжена, пожалуйста, зарядите ее как можно скорее, чтобы избежать частого разряда батареи и повлиять на ее активность.;
4. Избегайте повторного принудительного включения питания после разрядки аккумулятора, чтобы избежать необратимого повреждения аккумулятора;
5. Пожалуйста, используйте подходящий источник питания и адаптер питания при зарядке аккумулятора.
6. Если устройство не используется в течение длительного времени, аккумулятор следует регулярно заряжать.

Не оставляйте:

1. Не сохраняйте эту машину в следующих местах:

- Там, где есть вода;
- Места, подверженные воздействию высокой температуры, влажности, прямых солнечных лучей, высокой запыленности и высокого содержания соли;
- Места, которые наклоняются, вибрируют и сотрясаются;
- Места хранения химических веществ или агрессивных газов.

2. Следует избегать соприкосновения твердых и острых предметов с шейкой, чтобы избежать царапин и повреждения предварительного кольца.

3. Очищенное оборудование необходимо тщательно высушить и хранить в условиях, соответствующих требованиям.:

Условия хранения: температура: -10 C ~ + 55 C; относительная влажность: <80%R.H. Неконденсирующееся состояние ;

Атмосферное давление: (70,0~106,0) кПа

Параметры продукта

Название продукта: Умный мастер красоты

Модель продукта: Р1

Размер изделия: (размер L) 137 × 167 × 32 мм (размер S) 120 × 132 × 32 мм

Вес изделия: (размер L) 60 грамм (включая батарею и ошейник) (размеры) 51 грамм (включая батарею и ошейник)

Источник питания: внутренний источник питания

Номинальный вход: 5 В == 1А

Способ связи: Bluetooth с низким энергопотреблением 4.1 и выше

Идентификатор СМИТ: 2020DP11849

Исполнительный стандарт: GB4706.1-2005

Рабочая среда: температура: -10 C ~ + 55 C; относительная влажность: <80%R.H. Неконденсирующееся состояние;

Атмосферное давление: (70,0~106,0) кПа

Условия хранения/транспортировки: Температура: -10 C ~ +55 C

Относительная влажность: <80%R.H. Неконденсирующееся состояние

Атмосферное давление: (70,0~106,0) кПа

Время работы: около 50 часов в режиме ожидания

Время зарядки: около 1,5 часов

Гарантийный талон №

Имя пользователя	Артём		
Контактный номер	+7 985 123 45 67		
Адрес пользователя	г. Москва, ул. Садовая, д. 10		
Название продукта	Модель продукта		
Дата покупки	Платформа для покупок		
维 修 чинить помнить запись	дата	Причина неисправности и состояние обработки	

Описание гарантии:
даты вашей покупки

Описание гарантии:

1. С даты вашей покупки этот продукт будет использоваться в обычном режиме в соответствии с инструкциями, в рамках продукта, если продукт появится. При сбоях в работе, **если** которые не вызваны искусственным повреждением, гарантийный срок составляет 12 месяцев, а по истечении 12 месяцев взимается плата за техническое обслуживание.
2. Ремонт, который не вызван качеством продукции компании, например, неправильным использованием, неправильным хранением, несанкционированной разборкой и т.д. За ущерб, **заплаченный** причиненный по этой причине, будут взиматься расходы на техническое обслуживание, а расходы на перевозку несет пользователь.
3. Когда изделие будет отремонтировано, пожалуйста, отправьте этот гарантийный талон и приобретенный товар обратно в компанию послепродажного обслуживания надлежащим образом.

Тяньцзиньская фруктовая технологическая компания, Ооо.

Адрес: Зеленая промышленная база Хайтай, № 6, Шестая дорога развития Хайтай, Промышленная зона Хуаюань, Тяньцзинь 1

G-1101-15 - G-1101-32 ?

Вебсайт компании: www.fruitech.cn |

Горячая линия обслуживания: 400-900-5115 |

Почтовый индекс: 300384